

# 04

## 교 정

### ORTHODONTIC MATERIALS

|            |     |
|------------|-----|
| 디지털        | 128 |
| 브라켓        | 131 |
| 튜브         | 137 |
| 밴드         | 138 |
| 와이어        | 139 |
| 교정용 고정원 장치 | 145 |
| 구내 교정 제품   | 147 |
| 교정용 접착제    | 150 |
| 엘라스틱       | 151 |
| 구외교정제품     | 153 |
| 기구         | 154 |

## | 제조원 ORMCO(옵코) | 판매원 신흥

**| 용도** 치아 교정을 위해 치면에 붙이는 브라켓과 와이어를 커스터마이징해서 제작

## | 특징

- 환자 개개인에 맞는 브라켓과 와이어를 제작하는 100% 환자 맞춤식 치아 교정 장치(세라믹, 메탈)
- 3D 디지털 기술로 전 치료 계획을 수립하여 장치 제작
- Jig(본딩 보조 장치)를 통한 정확하고 간편한 본딩 가능
- 브라켓 리본딩, 와이어 벤딩 등 불필요한 교정 치료 단계 최소화
- 치료 시작 전, 치료 후의 모습을 좀 더 정확하게 예측 가능
- INSIGNIA SI Bent Hook 90° : 242-0060(1팩=30개)
- INSIGNIA SI Bent Hook 180° : 242-0050(1팩=30개)

## | 포장 및 구성

INSIGNIA 키트 -  
브라켓 5-5, Buccal Tube 6-7(IDB Jig 포함),  
와이어 U/L 5조, Additional 개별 지그




**3D Treatment Planning  
Custom-Designed Appliances  
Precision Results**






## Step 1

개인별 치아 인상 채득 or  
스캔(Scan) 후  
Insignia Center로 발송

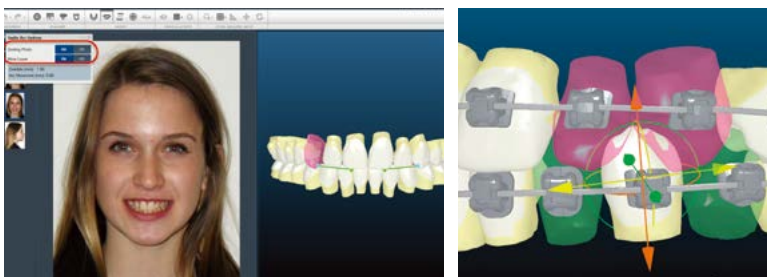

## Step 2

전용 프로그램을 통한  
개인별 3D Virtual Setup을  
통한 Design

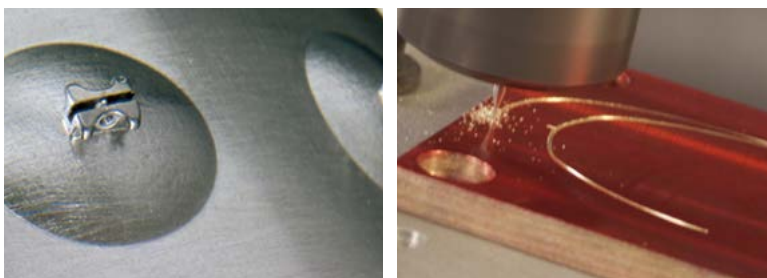

## Step 3

개인별 맞춤 브라켓,  
와이어 제작



## Step 4

INSIGNIA Case Kit 제작 완료  
(UPS 국제 운송 / 보통 4~5주)



## Step 5

치아에 본딩  
(Jig 사용으로 정확한  
포지셔닝 가능)



## Step 6

교정 치료 완료

## BENDER-I | 벤더-아이

FIXED RETAINER BONDING SYSTEM | 273813

| 제조원 YOAT(요트) | 판매원 신홍

| 용도 교정용 선재 제작

### | 특징

- 3D 디지털 Fixed Retainer Wire 제작 기기
- 석고 모델을 기공소에 보낼 필요 없이 De-bonding 후 바로 현장 제작 가능
- 환자의 구강 스캔 후 디자인-출력의 절차만 거쳐 15분 내외로 빠른 제작 가능
- 전용 소프트웨어를 통해 세부적인 Fixed Retainer Line 모델링 가능

### | 포장 및 구성

- 제작 장비, 전용 프로그램
- 용량/무게 : 22kg
- 사이즈 : H36.4×W31.8×D49.8cm
- 색상 : White

### | 코드 번호

#YT1000-001



## ● REAL TIME FIXED RETAINER BONDING SYSTEM



### Step 1

Intraoral Scanner를 통한 치열상태  
3D 스캐닝  
인상 채득, 석고모델 제작 불필요

### Step 2

스캐닝 데이터 기반 유지장치 자동  
설계  
교정 후 유지장치 설계 표준화 및  
최적화 가능



### Step 3

와이어 밴딩 머신을 통한 실시간  
유지장치 제작  
의료현장에서 '진료 - 진단 - 시술'  
실시간 서비스 제공



## Marking System

Colored ID Dots Are Located On Tie-Wings Of Each Bracket

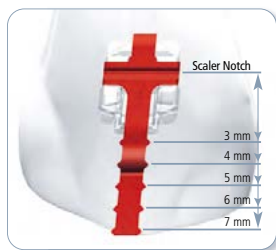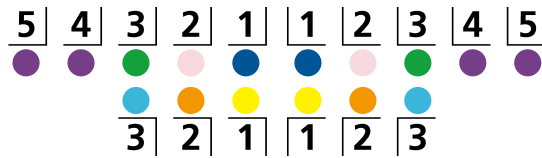

- Low Torque
- Standard Torque
- Super Torque



## | 제조원 ORMCO(음코) | 판매원 신홍

| 용도 치면에 붙이는 브라켓으로 와이어를 고정시킴

### | 특징

- Low-Friction Aesthetic Passive Self Ligation BKT
- Poly Crystal Alumina(PCA) 재질로 얼룩이 묻어나지 않음
- 강력한 본딩력은 물론, 마찰 저항을 최소화하여 빠르고 효과적인 교정시술이 가능
- Damon Clear 브라켓(3-3)에는 Color-Coded Removable Positioning Gauge가 들어있음

## | 포장 및 구성

10개 / 팩

## | 코드 번호

| Tooth         |          | Torque Angulation |       | Order Number |          |
|---------------|----------|-------------------|-------|--------------|----------|
| 상악            |          |                   |       | Right        | Left     |
| Bicuspid(4,5) | Standard | - 11 °            | + 2 ° | 497-6490     | 497-6491 |
| Bicuspid-Hook | Standard | - 11 °            | + 2 ° | 497-7490     | 497-7491 |
| 하악            |          |                   |       | Right        | Left     |
| Central       | Standard | - 3 °             | + 2 ° | 497-6410     | 497-6411 |
| Lateral       | Standard | - 3 °             | + 2 ° | 497-6420     | 497-6421 |
| Cuspid        | Standard | + 7 °             | + 2 ° | 497-6430     | 497-6431 |

## Damon Clear 2

- 기존 Damon Clear의 업그레이드 된 버전
- 현존 브라켓 중 가장 심미적인 장치
- 최적화된 Slot Depth로 Rotation Control 2배 향상
- 세심한 마무리와 효율적인 치료 가능
- Slot Size : .022" × .028"
- SpinTek Opening Instrument : 866-4014
- Damon Clear Debonding Instrument : 866-4019

## | 코드 번호

| 부위             |          | Torque Angulation |     | Order Number |          |
|----------------|----------|-------------------|-----|--------------|----------|
| 상악             |          |                   |     | Right        | Left     |
| Central(1)     | Standard | 15 °              | 5 ° | 497-6560     | 497-6561 |
|                | Low      | 2 °               | 5 ° | 497-6562     | 497-6563 |
|                | Super    | 22 °              | 5 ° | 497-6566     | 497-6567 |
| Lateral(2)     | Standard | 6 °               | 9 ° | 497-6570     | 497-6571 |
|                | Low      | -5 °              | 9 ° | 497-6572     | 497-6573 |
|                | Super    | 13 °              | 9 ° | 497-6574     | 497-6575 |
| Cuspid(3)-Hook | Standard | 7 °               | 5 ° | 497-7580     | 497-7581 |
|                | Super    | 11 °              | 5 ° | 497-7584     | 497-7585 |



## Marking System

Colored ID Dots Are Located On Tie-Wings Of Each Bracket



| 제조원 ORMCO(옵코) | 판매원 신홍

| 용도 치면에 붙이는 브라켓으로 와이어를 고정시킴

### | 특징

- 기존 Ceramic 브라켓에 비해 개선된 심미성과 쉽게 파절되지 않는 내구성
- 탁월한 심미성의 반투명한 브라켓으로 환자의 치아 색과 조화를 이룸
- 얼룩과 변색과 변형을 방지하도록 설계
- 넓은 Tie-wing 공간으로 Double Tying 가능

- 부드러운 표면과 둥근 모서리로 환자의 편안함 증대
- Laser Etching Base 기술을 사용하여 본딩력 및 디본딩력 우수
- 전용 Debonding Plier를 이용해 최소한의 힘으로 브라켓 제거 가능
- Low profile로 교합간섭을 최소화
- Slot Size : .018" / .022"
- Symetri Clear Debonding Plier : 866-4025

### | 포장 및 구성

10개 / 팩

| Tooth                  | Torque | Angulation | 018      |          | 022      |          |
|------------------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 상악                     |        |            | Right    | Left     | Right    | Left     |
| Central(1)             | +17°   | 4°         | 418-1110 | 418-1111 | 419-1110 | 419-1111 |
| Lateral(2)             | +10°   | 8°         | 418-1210 | 418-1211 | 419-1210 | 419-1211 |
| (Optional Slim In/Out) | +10°   | 8°         | 418-1212 | 418-1213 | 419-1212 | 419-1213 |
| Cuspid(3)              | 0°     | 8°         | 418-1310 | 418-1311 | 419-1310 | 419-1311 |
| Cuspid - Hook          | 0°     | 8°         | 418-2310 | 418-2311 | 419-2310 | 419-2311 |
| Bicuspid(4, 5)         | -7°    | 0°         | 418-1510 |          | 419-1510 |          |
| Bicuspid - Hook        | -7°    | 0°         | 418-2510 | 418-2511 | 419-2510 | 419-2511 |
| 하악                     |        |            | Right    | Left     | Right    | Left     |
| Anterior(1, 2)         | -6°    | 0°         | 418-1010 |          | 419-1010 |          |
| Cuspid(3)              | 0°     | 3°         | 418-1410 | 418-1411 | 419-1410 | 419-1411 |
| Cuspid - Hook          | 0°     | 3°         | 418-1241 | 418-2411 | 419-2410 | 419-2411 |
| 1st Bicuspid(4)        | -12°   | 0°         | 418-1610 |          | 419-1610 |          |
| 1st Bicuspid - Hook    | -12°   | 2°         | 418-2610 | 418-2611 | 419-2610 | 419-2611 |
| 2nd Bicuspid(5)        | -17°   | 0°         | 418-1710 |          | 419-1710 |          |
| 2nd Bicuspid - Hook    | -17°   | 2°         | 418-2710 | 418-2711 | 419-2710 | 419-2711 |



## Marking System

Colored ID Dots Are Located On Tie-Wings Of Each Bracket

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



| 제조원 ORMCO(음코) | 판매원 신홍

| 용도 치면에 붙이는 브라켓으로 와이어를 고정시킴

## 특징

- 기존 데이몬 Q에 비해 향상된 디자인으로 로테이션 컨트롤이 2배 향상됨
- 혹 또한 개선이 되어 더욱 견고해짐
- Scribe line으로 인해 Positioning에 용이함
- Slot Size: 0.022 × 0.0275

## | 코드 번호

Standard Torque

| Tooth               | Torque | Angulation | Order Number |          |
|---------------------|--------|------------|--------------|----------|
| 상악                  |        |            | Right        | Left     |
| Central(1)          | +12°   | +5°        | 491-8860     | 491-8861 |
| Lateral(2)          | +8°    | +9°        | 491-8870     | 491-8871 |
| Cuspid(3)           | +7°    | +5°        | 491-8880     | 491-8881 |
| Cuspid w/hook       | +7°    | +5°        | 491-9880     | 491-9881 |
| Bicuspid(4,5)       | -11°   | +2°        | 491-8890     | 491-8891 |
| Bicuspid w/hook     | -11°   | +2°        | 491-9890     | 491-9891 |
| 하악                  |        |            | Right        | Left     |
| Central(1)          | -3°    | +2°        | 491-8810     | 491-8811 |
| Lateral(2)          | -3°    | +4°        | 491-8820     | 491-8821 |
| Cuspid(3)           | +7°    | +5°        | 491-8830     | 491-8831 |
| Cuspid w/hook       | +7°    | +5°        | 491-9830     | 491-9831 |
| 1st Bicuspid        | -12°   | +4°        | 491-8840     | 491-8841 |
| 1st Bicuspid w/hook | -12°   | +4°        | 491-9840     | 491-9841 |
| 2nd Bicuspid        | -17°   | +4°        | 491-8850     | 491-8851 |
| 2nd Bicuspid w/hook | -17°   | +4°        | 491-9850     | 491-9851 |

| 포장 및 구성

10개 / 팩

Super Torque


| Tooth               | Torque | Angulation | Order Number |          |
|---------------------|--------|------------|--------------|----------|
| 상악                  |        |            | Right        | Left     |
| Central(1)          | +22°   | +5°        | 491-8866     | 491-8867 |
| Lateral(2)          | +13°   | +9°        | 491-8874     | 491-8875 |
| Cuspid(3)           | +11°   | +5°        | 491-8884     | 491-8885 |
| Cuspid w/hook       | +11°   | +5°        | 491-9884     | 491-9885 |
| 하악                  |        |            | Right        | Left     |
| Cuspid(3)           | +13°   | +5°        | 491-8834     | 491-8835 |
| Cuspid w/hook       | +13°   | +5°        | 491-9834     | 491-9835 |
| 1st Bicuspid        | -5°    | +4°        | 491-8842     | 491-8843 |
| 1st Bicuspid w/hook | -5°    | +4°        | 491-9842     | 491-9843 |

Low Torque

| Tooth               | Torque | Angulation | Order Number |          |
|---------------------|--------|------------|--------------|----------|
| 상악                  |        |            | Right        | Left     |
| Central(1)          | +2°    | +5°        | 491-8862     | 491-8863 |
| Lateral(2)          | -5°    | +9°        | 491-8872     | 491-8873 |
| Cuspid(3)           | -9°    | +5°        | 491-8882     | 491-8883 |
| Cuspid w/hook       | -9°    | +5°        | 491-9882     | 491-9883 |
| 하악                  |        |            | Right        | Left     |
| Cuspid(3)           | -11°   | +2°        | 491-8814     | 491-8815 |
| Cuspid w/hook       | -11°   | +4°        | 491-8824     | 491-8825 |
| 1st Bicuspid        | 0°     | +5°        | 491-8834     | 491-8835 |
| 1st Bicuspid w/hook | 0°     | +5°        | 491-9834     | 491-9835 |

### Marking System

Colored ID Dots Are Located On Tie-Wings Of Each Bracket

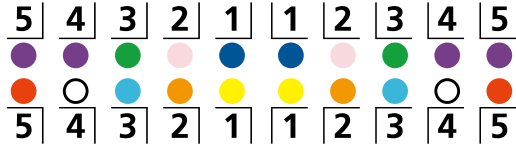

| 제조원 ORMCO(음코) | 판매원 신흥

| 용도 치면에 붙이는 브라켓으로 와이어를 고정시킴

### 특징

- 개폐방식이 SpinTek™ Slide로 되어있어 와이어 교체 시 보다 신속하고 사용하기 편리함
- 표면이 매끄럽고 라운드하여 이물감이 줄어들었고 위생적인 면이 향상됨
- 3-3(No Hook) & 하악 4번(Super Torque)에는 Color-Coded Removable Positioning Gauge가 들어있어 Positioning에 용이함

### | 코드 번호

Standard Torque

| Tooth           | Torque | Angulation | Order Number |          |
|-----------------|--------|------------|--------------|----------|
| 상악              |        |            | Right        | Left     |
| Central(1)      | +15°   | +5°        | 491-6460     | 491-6461 |
| Lateral(2)      | +6°    | +9°        | 491-6470     | 491-6471 |
| Cuspid(3)       | +7°    | +5°        | 491-6480     | 491-6481 |
| Bicuspid(4, 5)  | -11°   | +2°        | 491-6490     | 491-6491 |
| 하악              |        |            | Right        | Left     |
| Central(1)      | -3°    | +2°        | 491-6410     | 491-6411 |
| Lateral(2)      | -3°    | +4°        | 491-6420     | 491-6421 |
| Cuspid(3)       | +7°    | +5°        | 491-6430     | 491-6431 |
| 1st Bicuspid(4) | -12°   | +4°        | 491-6440     | 491-6441 |
| 2nd Bicuspid(5) | -17°   | +4°        | 491-6450     | 491-6451 |

Low Torque

| Tooth      | Torque | Angulation | Order Number |          |
|------------|--------|------------|--------------|----------|
| 상악         |        |            | Right        | Left     |
| Central(1) | +2°    | +5°        | 491-6462     | 491-6463 |
| Lateral(2) | -5°    | +9°        | 491-6472     | 491-6473 |
| Cuspid(3)  | -9°    | +5°        | 491-6482     | 491-6483 |
| 하악         |        |            | Right        | Left     |
| Central(1) | -11°   | +2°        | 491-6414     | 491-6415 |
| Lateral(2) | -11°   | +4°        | 491-6424     | 491-6425 |
| Cuspid(3)  | 0°     | +5°        | 491-6432     | 491-6433 |

- Slot Size : 하악 전치부 : .022"×.027", 그 외 : .022"×.028"

- SpinTek Opening Instrument : 866-4014

- Drop-in Hook : 242-0114 (1팩=30개)

### Damon Q with Hook

- 기존 Damon Q 3-5번에 Hook이 부착
- Hook을 부착해야 하는 술자의 번거로움 감소
- 엘라스틱을 걸기에 용이하고 환자의 편안함 증대
- Slot Size : .022"×.028"

### | 포장 및 구성

10개 / 팩

Super Torque

| Tooth           | Torque | Angulation | Order Number |          |
|-----------------|--------|------------|--------------|----------|
| 상악              |        |            | Right        | Left     |
| Central(1)      | +22°   | +5°        | 491-6466     | 491-6467 |
| Lateral(2)      | +13°   | +9°        | 491-6474     | 491-6475 |
| Cuspid(3)       | +11°   | +5°        | 491-6484     | 491-6485 |
| 하악              |        |            | Right        | Left     |
| Cuspid(3)       | +13°   | +5°        | 491-6434     | 491-6435 |
| 1st Bicuspid(4) | -5°    | +4°        | 491-6442     | 491-6443 |


### Damon Q with Hook

| 부위                   | Torque   | Angulation | Order Number |          |
|----------------------|----------|------------|--------------|----------|
| 상악                   |          |            | Right        | Left     |
| Cuspid(3)-Hook       | Standard | 7° 5°      | 491-7680     | 491-7681 |
|                      | Low      | -9° 5°     | 491-7682     | 491-7683 |
|                      | Super    | 11° 5°     | 491-7684     | 491-7685 |
| Bicuspid(4,5)-Hook   | Standard | -11° 2°    | 491-7690     | 491-7691 |
| 하악                   |          |            | Right        | Left     |
| Cuspid(3)-Hook       | Standard | 7° 5°      | 491-7630     | 491-7631 |
|                      | Low      | 0° 5°      | 491-7632     | 491-7633 |
|                      | Super    | 13° 5°     | 491-7634     | 491-7635 |
| 1st Bicuspid(4)-Hook | Standard | -12° 4°    | 491-7640     | 491-7641 |
| 2nd Bicuspid(5)-Hook | Standard | -17° 4°    | 491-7650     | 491-7651 |



### \* Color Code

Open Dimple (○) = 상악  
Red Dimple (●) = 하악

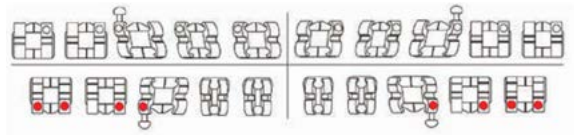

### | 코드 번호

| Tooth      | 018        |            | 022        |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
|            | Right      | Left       | Right      | Left       |
| 1          | 350-0130   | 350-0131   | 351-0130   | 351-0131   |
| 2          | 350-0250   | 350-0251   | 351-0250   | 351-0251   |
| 3          | 350-0330   | 350-0331   | 351-0330   | 351-0331   |
| 상악 3(Hook) | (350-1330) | (350-1331) | (351-1330) | (351-1331) |
| 4, 5       | 350-0514   | Universal  | 351-0514   | Universal  |
| (Hook)     | (350-1510) | (350-1511) | (351-1510) | (351-1511) |
| 1, 2       | 350-0025   | Universal  | 351-0025   | Universal  |
| 3(Hook)    | (350-1442) | (350-1443) | (351-1442) | (351-1443) |
| 하악 4       | 350-0625   | Universal  | 351-0625   | Universal  |
| (Hook)     | (350-1622) | (350-1623) | (351-1622) | (351-1623) |
| 5          | 350-0735   | Universal  | 351-0735   | Universal  |
| (Hook)     | (350-1732) | (350-1733) | (351-1732) | (351-1733) |

| 제조원 ORMCO(음코) | 판매원 신홍

| 용도 치면에 붙이는 것으로 와이어를 고정시킴

### | 특징

- 전반적으로 브라켓의 크기를 30% 줄여 환자의 편안함을 증대시키고 기능적인 면을 개선함
- 더욱 Round 처리된 Contour로 환자의 편안함 증대
- Optimesh XRT Base 처리로 분당력 증가
- 변형이 없는 Hemi Hook™과 영구적인 I.D 마킹 시스템으로 실용성 향상
- 기존 브라켓보다 강한 강도의 스테인리스 스틸로 제작되어 브라켓은 작아졌지만 강도는 동일함

| 포장 및 구성 10개 / 팩

## ALIAS | 알리아스

ALIAS

| 제조원 ORMCO(음코) | 판매원 신홍

| 용도 설측 치면에 붙이는 것으로 와이어를 고정시킴

### | 특징

- The World's First Passive Self-Ligation Lingual System
- 쉬운 개폐 방식 : SpinTek 방식을 채택하여 빠르고 간편하게 Wire 교체가 가능하며, 마찰력을 줄여 치료기간 단축 가능
- 특허 받은 Square Slot으로 토크 및 로테이션 컨트롤을 최대화
- 간소화된 Finishing 밴딩 : Straight Wire Appliance를 채택해, Finishing 밴딩을 간소화
- Slot Size : .018" x .018" - Square Slot
- Lingual Hinge-Cap Opener : 802-1001



| 포장 및 구성 5개 / 팩

### | 코드 번호

| Bracket Kits                              | Part Number |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>5 PACKS</b>                            |             |
| Upper 2-2  .018   +60/0/0                 | 369-0020    |
| Lower 2-2  .018   +45/0/0                 | 369-0002    |
| U3R  .018   +60/+08/+06                   | 369-0030    |
| U3L  .018   +60/+08/+06                   | 369-0031    |
| L3R  .018   +45/+08/+06                   | 369-0012    |
| L3L  .018   +45/+08/+06                   | 369-0011    |
| Upper 4's & Lower 4's & 5's  .018   0/0/0 | 369-0040    |
| Upper 5's  .018   0/0/0                   | 369-0050    |
| U6R  .018   +10/0/+05                     | 369-0060    |
| U6L  .018   +10/0/+05                     | 369-0061    |
| Lower 6's  .018   0/0/0                   | 369-0080    |
| U7R  .018   +10/0/+05 HK                  | 369-1070    |
| U7L  .018   +10/0/+05 HK                  | 369-1071    |
| L7R  .018   0/0/0 HK                      | 369-1090    |
| L7L  .018   0/0/0 HK                      | 369-1091    |
| <b>.018X.018 SST</b>                      |             |
| Straight Wire SST .018X.018 Sm Pk10       | 204-2301    |
| Straight Wire SST .018X.018 Med Pk10      | 204-2302    |
| Straight Wire SST .018X.018 Lg Pk10       | 204-2303    |



## NEW STB LIGHT LINGUAL BRACKET | 뉴 에스티비 라이트 링귄 브래킷

STB LINGUAL

| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신홍

| 용도 설측 치면에 붙이는 것으로 와이어를 고정시킴

| 특징

- Light-Force Mechanic 원리를 이용한 신개념 설측 브래킷
- Light-Force Low-Friction으로 치아 이동이 빠름


STb™ Social 6 Light Lingual System

Minor Crowding이나 전치부 Spacing Issue 치료에 적합한 브래킷

- 크기가 축소되고 윤곽이 매끄러워져 이물감이 줄고 발음 문제를 최소화하여 환자에게 최대의 만족감 제공
- 전 부위에 Hook의 선택적 적용이 가능

| 포장 및 구성 10개 / 팩

STb™ STRAIGHT-WIRE MARKING SYSTEM

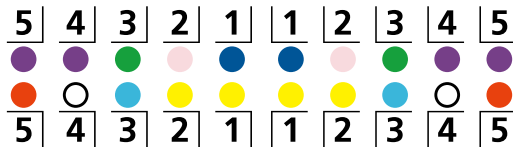

| 코드 번호

| Tooth                   | Torque | Angulation | Order Number |           |
|-------------------------|--------|------------|--------------|-----------|
| 상악                      |        |            | Right        | Left      |
| Anteriors 3-3           | +55°   | 0°         | 369-2102     | Universal |
| Anteriors 3-3 With Hook |        |            | 369-3102     | Universal |
| Bicuspid 4&5            | +11°   | 0°         | 369-2400     | Universal |
| Bicuspid 4&5 With Hook  |        |            | 369-3400     | Universal |
| Molars 6 With Hook      | +10°   | 0°         | 369-3600     | 369-3601  |
| Molars 7 With Hook      | +10°   | 0°         | 369-3700     | 369-3701  |
| 하악                      |        |            | Right        | Left      |
| Anteriors 3-3           | +40°   | 0°         | 369-2110     | Universal |
| Anteriors With Hook     |        |            | 369-3110     | Universal |
| Bicuspid 4&5            | +11°   | 0°         | 369-2400     | Universal |
| Bicuspid 4&5 With Hook  |        |            | 369-3400     | Universal |
| Molars 6 With Hook      | 0°     | 0°         | 369-3610     | 369-3611  |
| Molars 7 With Hook      | 0°     | 0°         | 369-3710     | 369-3711  |



## NEW STB STRAIGHTWIRE APPLIANCE | 뉴 에스티비 스트레이트와이어 어플라이언스

STB LINGUAL

| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신홍

| 용도 설측 치면에 붙이는 것으로 와이어를 고정시킴

STb™ Straightwire Appliance

Straightwire로 견치부 Offset Bend 없이 Straightwire의 적용이 가능하도록 디자인 되어 순측교정과 같이 SWA로 편안한 치료가 가능함

- 기존 STb Bracket과 소구치 옵션만 다름

| 포장 및 구성 10개 / 팩

| 코드 번호

| Tooth                  | Torque | Angulation | Order Number |           |
|------------------------|--------|------------|--------------|-----------|
| 상/하악                   |        |            | Right        | Left      |
| Bicuspid 4&5           | +11°   | 0°         | 369-2402     | Universal |
| Bicuspid 4&5 With Hook |        |            | 369-3402     | Universal |

## PEERLESS TUBES | 피어리스 튜브

TUBE

### 1ST Molar Tube



Triple/Occlusal HG



Combo/Occlusal HG



Single



Double



Single/Distal Extension

### 2ND Molar Tube

| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신흥

| 용도 구치부 치면에 붙여 와이어를 잡아줌

#### | 특징

- Peerless M-D치수: Triple 3.5mm, Double 3.4mm, Single 3.3mm, M/P와 Pix 2mm
- 모든 튜브에 근심치는 홈이 있음

| 포장 및 구성 10개 / 팩

#### | 코드 번호

#7번(제2대구치) 튜브(Single만)

| Tooth |   | Welding 용 |          | DBS(Direct Bonding System)용 |          |
|-------|---|-----------|----------|-----------------------------|----------|
|       |   | 018       | 022      | 018                         | 022      |
| 상악용   | R | 517-2104  | 517-2103 | 340-5047                    | 342-5047 |
|       | L | 516-2104  | 516-2103 | 340-5147                    | 342-5147 |
| 하악용   | R | 513-2108  | 513-2107 | 340-5237                    | 342-5237 |
|       | L | 512-2108  | 512-2107 | 340-5337                    | 342-5337 |

#6(제1대구치) 튜브

| Slot Type    |   | Welding 용 |          | DBS 용<br>(Direct Bonding System) |          |
|--------------|---|-----------|----------|----------------------------------|----------|
|              |   | 018       | 022      | 018                              | 022      |
| Triple       | R | 174-0422  | 174-0421 | -                                | -        |
|              | L | 173-0422  | 173-0421 | -                                | -        |
| Combina-tion | R | 196-0210  | 196-0209 | -                                | -        |
|              | L | 195-0210  | 195-0209 | -                                | -        |
| 상악용 Double   | R | 172-0436  | 172-0435 | 340-0136                         | 342-0136 |
|              | L | 171-0436  | 171-0435 | 340-0036                         | 342-0036 |
| Single       | R | 188-0308  | 188-0307 | 340-2006                         | 342-2006 |
|              | L | 187-0308  | 187-0307 | 340-2106                         | 342-2106 |
| 하악용 Double   | R | 172-0426  | 172-0425 | 340-0426                         | 342-0425 |
|              | L | 171-0426  | 171-0425 | 340-0526                         | 342-0525 |
| Single       | R | 190-0306  | 190-0305 | 340-2216                         | 342-2216 |
|              | L | 189-0306  | 189-0305 | 340-2316                         | 342-2316 |

## SNAPLINK | 스냅링크

TUBE | 190697~



| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신흥

| 용도 구치부 치면에 붙여 와이어를 잡아줌

#### | 특징

- 개폐형 방식의 버컬 튜브로 술자의 편안함 제공
- 마찰력을 줄이고 Sliding Mechanic을 제공
- 체어타임을 줄이고 와이어를 더 빠르게 교체할 수 있음
- Low Profile과 둥근 모서리 처리로 인해 환자의 불편함을 최소화
- 80계이지 메쉬타입의 베이스를 통해 튜브 탈락률 감소
- Opening Instrument : 866-4014

| 포장 및 구성 10개 / 팩

| Tooth | Torque | Angulation | 022R     | 022R     |
|-------|--------|------------|----------|----------|
| 상악    | -18°   | 0°         | 438-2160 | 438-2161 |
| 하악    | -28°   | 2°         | 438-2190 | 438-2191 |

## ACCENT BUCCAL TUBES | 엑센트 버컬 튜브

TUBE



### ACCENT TUBES

| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신홍

| 용도 구치부 치면에 붙여 와이어를 잡아줌

#### | 특징

- Accentuated Mesial Opening 되어있음
- Convertible Cap이 없음
- 022slot

#### | 포장 및 구성

10개 / 팩

#### | 코드 번호

|   | Tooth |  | Welding용 | DBS(Direct Bonding System)용 |
|---|-------|--|----------|-----------------------------|
| 상 | R     |  | 514-0215 | 342-4115                    |
|   | L     |  | 515-0215 | 342-5115                    |
| 하 | R     |  | 515-0213 | 342-5213                    |
|   | L     |  | 514-0213 | 342-4213                    |

### ACCENT MINI TUBES

| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신홍

| 용도 구치부 치면에 붙여 와이어를 잡아줌

#### | 특징

- 부드러운 외곽선과 낮은 Profile로 환자의 불편함 현저히 감소
- 특허받은 베이스레이저 처리로 본딩력 향상
- Lace Back을 위한 Mesial, Distal Under Cut 처리
- Damon, MBT Prescription 가능

#### | 포장 및 구성

10개 / 팩

#### | 코드 번호(Damon® Rx)

|   | Tooth | Torque | Angulation | 022R     | 022L     |
|---|-------|--------|------------|----------|----------|
| 상 | 6     | -18°   | 0          | 513-0162 | 513-0163 |
|   | 7     | -27°   | 0          | 513-0170 | 513-0171 |
| 하 | 6     | -28°   | 2          | 513-0164 | 513-0165 |
|   | 7     | -10°   | 0          | 513-0172 | 513-0173 |

#### | 코드 번호(MBT Rx)

|   | Tooth | Torque | Angulation | 018R     | 018L     | 022R     | 022L     |
|---|-------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 상 | 6     | -14°   | 0          | 340-1364 | 340-1365 | 342-1364 | 342-1365 |
|   | 7     | -14°   | 0          | 340-1374 | 340-1375 | 342-1374 | 342-1375 |
| 하 | 6     | -20°   | 0          | 340-1366 | 340-1367 | 342-1366 | 342-1367 |
|   | 7     | -10°   | 0          | 340-1376 | 340-1377 | 342-1376 | 342-1377 |

## TRIMLINE BAND® | 트림라인 밴드

BAND

| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신홍

| 용도 브라켓 탈락 방지 및 성장 교정을 위해 사용

#### | 특징

- 낮은 곳의 변연 용선을 안전하게 장착할 수 있음
- 윤곽의 높이 이상으로 장착할 수 있도록 제작
- 균형된 안정성과 적응성



| 포장 및 구성 5개 / 팩

#### | Size 및 코드 번호

- 제 1 대구치용(Size 5~36)

| UR  | UL  | UR  | UL  |
|-----|-----|-----|-----|
| 479 | 480 | 486 | 487 |
| LR  | LL  | LR  | LL  |
| 434 | 435 | 488 | 489 |

- 제 2 대구치용(Size 1~28)

- 소구치용(Bicuspid)

상악 : 331-01XX(Size 1~32)

하악 : 1소구치 : 332-01XX(Size 15~32)

2소구치 : 330-01XX(Size 15~32)

| 제조원 ORMCO(옵코) | 판매원 신흥

| 용도 치아 이동을 위해 브라켓에 넣는 제품

| 특징


- Copper Ni-Ti에 레이저 처리한 와이어로 7개의 영역으로 나누어 각 치아에 다른 Level의 힘을 가할 수 있게 함
- 특허 받은 레이저 처리로 와이어와 브라켓 표면 간의 마찰 감소
- 구치부 부분의 강도를 강화 시켜 튜브의 탈락 가능성 줄임
- Drs. Viecilli and Burstone의 FEA를 통해 치아이동을 위한 각 치아에 이상적인 힘을 발현하였으며, 더 빠르고 효율적인 치아이동을 할 수 있게 함

| 포장 및 구성

10개 / 팩

| 코드 번호

| Size        | Upper    | Lower    |
|-------------|----------|----------|
| .016        | 205-1911 | 205-1921 |
| .018 x .025 | 205-1931 | 205-1941 |

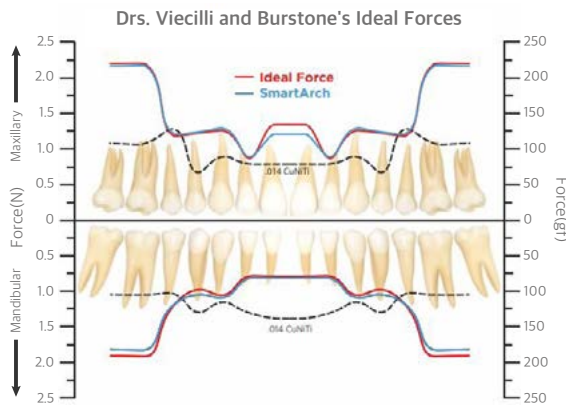

SmartArch CuNiTi  
200x



Standard CuNiTi  
200x

## 35°C COPPER NI-TI WIRE | 35°C 커퍼 나이타이 와이어

WIRE

| 제조원 ORMCO(옵코) | 판매원 신흥

| 용도 치아 이동을 위해 브라켓에 넣는 제품

| 특징

- Ni-Ti에 Copper(구리)를 함유시켜 특정 온도에서 최적의 메모리성을 발휘하도록 만든 재질

| 포장 및 구성

10개 / 팩



| 코드 번호

| 35°C Thermo Active Copper Ni-Ti (Broad Arch) |       |            |          |             |                  |             |             |             |
|----------------------------------------------|-------|------------|----------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Wire Configuration                           |       | Round Wire |          | Square Wire | Rectangular Wire |             |             |             |
|                                              |       | .016       | .018     | .017 x .017 | .016 x .022      | .017 x .025 | .019 x .025 | .021 x .025 |
| 상악                                           | Small | 205-0064   |          |             | 210-0922         |             | 210-0925    | 210-0926    |
|                                              | Large | 205-0065   | 205-0069 | 210-0931    | 210-0932         | 210-0933    | 210-0935    | 210-0936    |
| 하악                                           | Small | 205-0066   |          |             | 211-0922         |             | 211-0925    | 211-0926    |
|                                              | Large | 205-0067   | 205-0071 | 211-0931    | 211-0932         | 211-0933    | 211-0935    | 211-0936    |



| 제조원 ORMCO(옵코) | 판매원 신흥

| 용도 치아 이동을 위해 브라켓에 넣는 제품

| 포장 및 구성 5개 / 팩

(1) Damon Copper NiTi (With Preload Stops) (10개 / 팩)

| Wire Size | .013     | .014     | .016     | .018     | .014 × .025 | .016 × .025 | .018 × .025 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Order No. | 205-1909 | 205-1902 | 205-1903 | 205-1904 | 210-1905    | 210-1906    | 210-1907    |

(2) Damon Posted Stainless Steel (10개 / 팩)

| Length between posts |  | Wire Size   |             | Length between posts |  | Wire Size   |             |
|----------------------|--|-------------|-------------|----------------------|--|-------------|-------------|
|                      |  | .016 × .025 | .019 × .025 |                      |  | .016 × .025 | .019 × .025 |
| 24mm                 |  | 227-1026    | 227-1027    | 34mm                 |  | 227-1036    | 227-1037    |
| 26mm                 |  | 227-1028    | 227-1029    | 36mm                 |  | 227-1038    | 227-1039    |
| 28mm                 |  | 227-1030    | 227-1031    | 38mm                 |  | 227-1040    | 227-1041    |
| 30mm                 |  | 227-1032    | 227-1033    | 40mm                 |  | 227-1042    | 227-1043    |
| 32mm                 |  | 227-1034    | 227-1035    |                      |  |             |             |

(3) Damon Stainless Steel (10개 / 팩)

| Wire Size   |             |
|-------------|-------------|
| .016 × .025 | .019 × .025 |
| 227-1067    | 227-1071    |

(4) Damon Ni-Ti w/20° Ant Torque (5개 / 팩)

| Anterior Torque Length | Wire Size   |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | .016 × .025 | .017 × .025 | .019 × .025 |
| 34mm                   | 227-0341    | 227-0342    | 227-0343    |
| 38mm                   | 227-0381    | 227-0382    | 227-0383    |

(5) Damon Reverse Ni-Ti w/20° Ant Torque (5개 / 팩)

| Anterior Torque Length | Wire Size   |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | .016 × .025 | .017 × .025 | .019 × .025 |
| 34mm                   | 216-3416    | 216-3417    | 216-3419    |
| 38mm                   | 227-0381    | 216-3817    | 216-3819    |

(6) Damon Reverse Ni-Ti without Ant Torque (5개 / 팩)

| Wire Size |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Arch Form | .016 × .025 .017 × .025 .019 × .025 |
|           | 216-3806 216-3807 216-3809          |

(7) Damon Low-Friction TMA (10개 / 팩)

| Wire Size   |             |
|-------------|-------------|
| .017 × .025 | .019 × .025 |
| 227-1112    | 227-1113    |

(8) Damon Low-Friction Color TMA (5개 / 팩)

| Color    | Wire Size   |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|
|          | .016 × .025 | .017 × .025 | .019 × .025 |
| Purple   | 227-1141    | 227-1142    | 227-1143    |
| Honeydew | 227-1151    | 227-1152    | 227-1153    |

## TMA WIRE | 티엠에이 와이어

WIRE



| 제조원 ORMCO(옵코) | 판매원 신홍

| 용도 | 치아 이동을 위해 브라켓에 넣는 제품

| 특징

- 반메모리성 와이어로 Detailing 작업에 이상적

| 포장 및 구성

10개 / 팩

| 코드 번호

| Wire Configuration |       | Round Wire Size |          | Square Wire Size | Rectangular Wire Size |             |             |             |
|--------------------|-------|-----------------|----------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |       | .016            | .018     | .0175 x .0175    | .016 x .022           | .017 x .025 | .019 x .025 | .021 x .025 |
| Standard Arch      | 상악    | 202-0003        | -        | -                | 202-0011              | 202-1007    | -           | 202-0013    |
|                    | 하악    | -               | -        | -                | 202-0014              | 202-1009    | 202-1010    | 202-0017    |
| Broad Arch 상악      | Small | 210-0301        | 210-0302 | -                | 210-1402              | 210-1403    | 210-1404    | 210-0405    |
|                    | Large | 210-0311        | 210-0312 | -                | 210-1412              | 210-1413    | 210-1414    | 210-0415    |
| Broad Arch 하악      | Small | 211-0301        | -        | -                | 211-1402              | 211-1403    | 211-1404    | 211-0405    |
|                    | Large | 211-0311        | 211-0312 | -                | 211-1412              | 211-1413    | 211-1414    | 211-0415    |
| Straight           |       | 266-0001        | 266-0002 | 266-0012         | 266-0010              | 266-0011    | 266-0013    | -           |

Straight형 .032 : 266-0004 Straight형 .036 : 266-0005포장

## REVERSE CURVE TMA WIRE

리버스 커브 티엠에이 와이어

WIRE



| 제조원 ORMCO(옵코) | 판매원 신홍

| 용도 | 치아 이동을 위해 브라켓에 넣는 제품

| 특징

- 교합면을 맞출 때 사용하는 와이어

| 포장 및 구성 10개 / 팩

| 코드 번호

| Arch Configuration | Wire Size   |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | .016 x .022 | .017 x .025 | .019 x .025 |
| Upper              | 215-0003    | 215-0004    | 215-0005    |
| Lower              | 216-0003    | 216-0004    | 216-0005    |

## REVERSE CURVE TMA WITH "T" LOOPS

리버스 커브 티엠에이 "티" 룰

WIRE



| 제조원 ORMCO(옵코) | 판매원 신홍

| 용도 | 치아 이동을 위해 브라켓에 넣는 제품

| 특징

- 우수한 티타늄 알로이 재질로, 뛰어난 치료 메카닉을 제공

- "T" Loop는 전치부 리트렉션이나 전치부 부분적 토크 발현에 효과적

- 아치 사이즈는 색상에 따라 구분 가능

| 포장 및 구성 10개 / 팩

| 코드 번호

| Arch Size Reverse Curve | Wire Size   |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | .016 x .022 | .017 x .025 | .019 x .025 |
| 30mm (Blue)             | 215-0021    | 215-0031    | 215-0041    |
| 32mm (White)            | 215-0022    | 215-0032    | 215-0042    |
| 34mm (Black)            | 215-0023    | 215-0033    | 215-0043    |
| 36mm (Red)              | 215-0024    | 215-0034    | 215-0044    |
| 38mm (Green)            | 215-0025    | 215-0035    | 215-0045    |
| 40mm (Yellow)           | 215-0026    | 215-0036    | 215-0046    |



## NI-TI WIRE | 나이타이 와이어

WIRE

| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신홍

| 용도 치아 이동을 위해 브라켓에 넣는 제품

| 특징 옴코의 대표적인 Nickel Titanium Wire

| 포장 10개 / 팩

| 코드 번호

| Wire Configuration |       | Round         |             |             |             |
|--------------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |       | .014          | .016        | .018        | .020        |
| 상악                 | Small | 205-0009      | 205-0001    | 205-0003    | -           |
|                    | Large | 205-0010      | 205-0002    | 205-0004    | -           |
| 하악                 | Small | 205-0011      | 205-0005    | -           | 205-0015    |
|                    | Large | 205-0012      | 205-0006    | 205-0008    | 205-0016    |
| Square             |       | Rectangular   |             |             |             |
|                    |       | .0175 × .0175 | .016 × .022 | .017 × .025 | .018 × .025 |
|                    |       | 210-0501      | 210-0502    | 210-0503    | 210-0504    |
|                    |       | -             | 210-0512    | 210-0513    | 210-0514    |
|                    |       | 211-0501      | 211-0502    | 211-0503    | -           |
|                    |       | 211-0511      | 211-0512    | 211-0513    | 211-0514    |

## REVERSE CURVE NI-TI WIRE | 리버스 커브 나이타이 와이어

WIRE

| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신홍

| 용도 치아 이동을 위해 브라켓에 넣는 제품

| 포장 10개 / 팩

| 코드 번호

| Wire Configuration | Round    |          | Rectangular |             |             |
|--------------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
|                    | .016     | .018     | .016 × .022 | .017 × .025 | .019 × .025 |
| 상악                 | 216-0116 | 216-0118 | 216-1622    | 216-1725    | 216-1925    |
| 하악                 | 217-0116 | 217-0118 | 217-1622    | 217-1725    | 217-1925    |

## S.S WIRE | 에스에스 와이어


WIRE

| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신홍

| 용도 치아 이동을 위해 브라켓에 넣는 제품

| 코드 번호

| 포장 및 구성 10개 / 팩

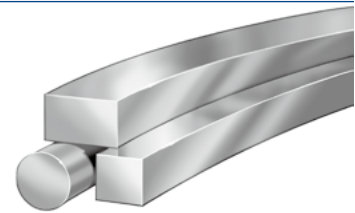

| Wire Configuration |    | Round(20개 / 팩) |          |          |          |          | Square(10ea/pkg) |
|--------------------|----|----------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
|                    |    | .012           | .014     | .016     | .018     | .020     | .016 × .016      |
| Broad Archform     | 상악 | Small          | -        | 210-0024 | 210-0026 | -        | -                |
|                    |    | Large          | 210-0122 | 210-0124 | 210-0126 | 210-0128 | 210-0130         |
|                    | 하악 | Small          | -        | 211-0024 | -        | -        | -                |
|                    |    | Large          | 211-0122 | 211-0124 | 211-0126 | 211-0128 | 211-0130         |
| Standard Archform  | 상악 | -              | -        | 206-0016 | -        | -        | -                |
|                    | 하악 | -              | 207-0014 | 207-0016 | -        | -        | -                |

| Wire Configuration |    | Rectangular Wire(10개 / 팩) |             |             |             |             |             |
|--------------------|----|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                    |    | .016 × .022               | .017 × .022 | .017 × .025 | .018 × .025 | .019 × .025 | .021 × .025 |
| Broad Archform     | 상악 | Small                     | 210-0701    | -           | -           | 210-0703    | 210-0704    |
|                    |    | Large                     | 210-0711    | -           | 210-0712    | 210-0713    | 210-0714    |
|                    | 하악 | Small                     | 211-0701    | -           | 211-0702    | 211-0703    | 211-0704    |
|                    |    | Large                     | 211-0711    | -           | 211-0712    | 211-0713    | 211-0714    |


Straight Wire

| Round                     |          |             |          |             |          |             |          |             |          | Square      |
|---------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| .012                      | .014     | .016        | .018     | .020        | .022     | .028        | .032     | .036        | .040     | .016 × .016 |
| 266-1312                  | 266-1314 | 266-1316    | 266-1318 | 266-1320    | 266-1322 | 266-1328    | 266-1332 | 266-1336    | 266-1340 | 252-1616    |
| 50개 / 팩                   |          | 40개 / 팩     |          |             |          | 30개 / 팩     |          | 20개 / 팩     |          | 10개 / 팩     |
| Rectangular Wire(10개 / 팩) |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |
| .016 × .022               |          | .017 × .022 |          | .017 × .025 |          | .018 × .022 |          | .018 × .025 |          | .019 × .025 |
| 254-1622                  |          | 254-1722    |          | 254-1725    |          | 254-1822    |          | 254-1825    |          | 254-1925    |

## MULTI BRAID WIRE | 멀티 브레이드 와이어

WIRE


D-rect (디렉트)

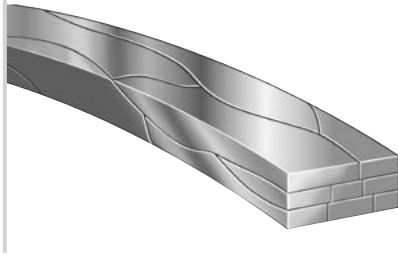

Respond (레스폰드)



Triple Flex (트리플플렉스)

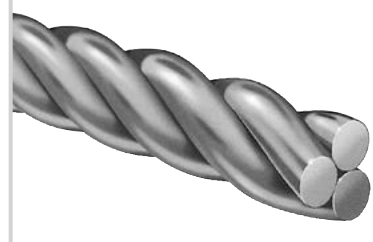

| 제조원 ORMCO(음코) | 판매원 신흥

| 용도 치아 이동을 위해 브라켓에 넣는 제품

### 1) D-rect (디렉트)

| 특징

- 8가닥으로 꼬여 있는 S.S Wire
- Light Force가 필요한 경우 사용함

| 포장 및 구성 10개 / 팩

| 코드 번호

| Standard Arch | Wire Size   |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               | .016 x .022 | .017 x .025 | .019 x .025 | .021 x .025 |
| Upper         | 201-0001    | 201-0002    | 201-0004    | 201-0005    |
| Lower         | 201-0011    | 201-0012    | 201-0014    |             |

### 2) Respond (레스폰드)

| 특징

- 6가닥으로 꼬여 있는 S.S Wire
- Leveling 및 Alignment이 필요한 초기 아치 와이어용

| 포장 및 구성 10개 / 팩

| 코드 번호

| Wire Configuration | Wire Size |          |          |
|--------------------|-----------|----------|----------|
|                    | .0155     | .0175    | .0195    |
| Standard Arch      |           | 203-1117 | 203-1119 |
| Straight           | 264-1115  | 264-1117 | 264-1119 |

### 3) Triple flex (트리플플렉스)

| 특징

- 3가닥으로 꼬여 있는 S.S Wire (Twisted Wire)
- 적절하게 약한 Force, 초기 Leveling 및 Alignment에 사용

| 포장 및 구성 10개 / 팩

| 코드 번호

| Straight Length | Wire Size |          |
|-----------------|-----------|----------|
|                 | .0150     | .0175    |
| 35cm            | 264-0150  | 264-0175 |

## BURSTONE LINGUAL ARCH SYSTEM | 버스톤 링귄 아치 시스템

WIRE

| 제조원 ORMCO(음코) | 판매원 신흥


| 용도 치아 이동을 위해 브라켓에 넣는 제품

| 특징 Burstone Lingual Bracket과 함께 사용

| 포장 및 구성 10개 / 팩

| 코드 번호

| Wire Type       |       | Wire Size |             |
|-----------------|-------|-----------|-------------|
|                 |       | Round     | Square      |
|                 |       | .032      | .032 x .032 |
| TMA             | Upper | 233-0002  | 233-0001    |
|                 | Lower | 233-0012  | 233-0010    |
| Stainless Steel | Upper | -         | 232-0001    |
|                 | Lower | -         | 232-0010    |

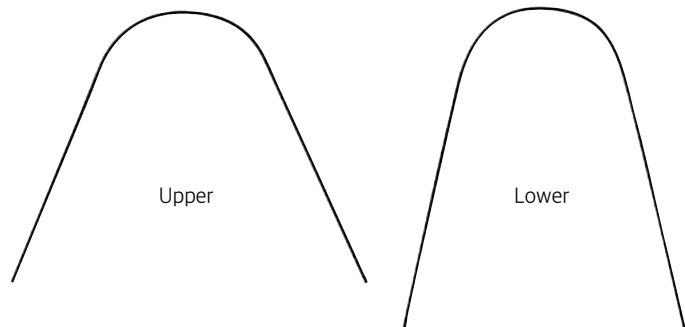

## STB LINGUAL STRAIGHT WIRE | 에스티비 링귤 스트레이트 와이어

WIRE

| 제조원 ORMCO(옵코) | 판매원 신홍

| 용도 치아 이동을 위해 브라켓에 넣는 제품

| 포장 및 구성 10개 / 팩

| 코드 번호


Copper Ni-Ti

| Arch Size<br>Lingual | Wire Size |          |             |             |
|----------------------|-----------|----------|-------------|-------------|
|                      | .013      | .016     | .016 × .016 | .018 × .018 |
| Small                | 204-2101  | 204-2111 | 204-2121    | 204-2141    |
| Medium               | 204-2102  | 204-2112 | 204-2122    | 204-2142    |
| Large                | 204-2103  | 204-2113 | 204-2123    | 204-2143    |

TMA

| Arch Size<br>Lingual | Wire Size     | Arch Size<br>Lingual | Wire Size   |
|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
|                      | .0175 x .0175 |                      | .018 x .018 |
| Small                | 204-2211      | Small                | 204-2301    |
| Medium               | 204-2212      | Medium               | 204-2302    |
| Large                | 204-2213      | Large                | 204-2303    |

Stainless Steel

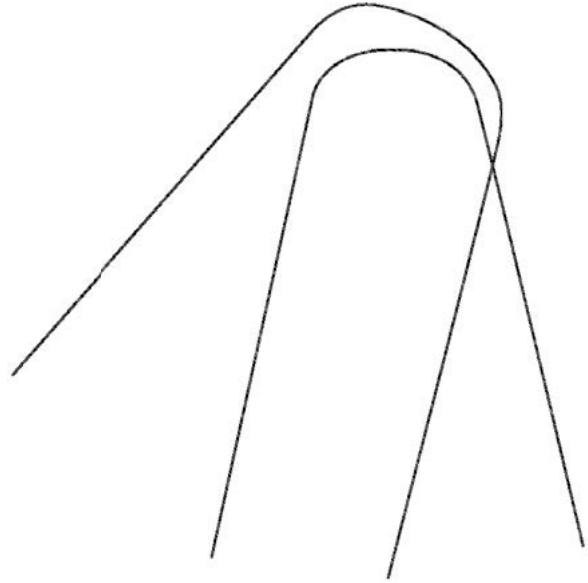

## LINGUAL STANDARD FORM | 링귤 스탠다드 폼

WIRE

| 제조원 ORMCO(옵코) | 판매원 신홍


| 용도 치아 이동을 위해 브라켓에 넣는 제품

| 특징

- 견치 Offset Bend가 없는 Plain Arch Type
- 상하구분 없음

| 포장 및 구성

10개 / 팩

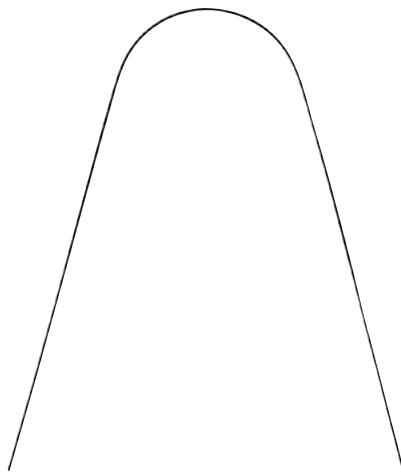

| 코드 번호

| Wire Type       | Wire Size |          |          |          |      |             |             |               |             |             |
|-----------------|-----------|----------|----------|----------|------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|                 | .014      | .0155    | .016     | .0175    | .018 | .016 × .016 | .016 × .022 | .0175 × .0175 | .017 × .025 | .018 × .025 |
| Respond         | 203-0006  |          | 203-0007 |          |      |             |             |               |             |             |
| D-Rect          |           |          |          |          |      |             | 201-0023    |               |             |             |
| TMA             |           |          | 202-0025 |          |      |             |             | 202-0018      | 202-0020    |             |
| Stainless Steel | 206-0000  | 206-0001 |          | 206-0002 |      | 206-0005    | 206-0006    | 206-0007      |             | 206-0008    |



| 제조원 JIN BIOMED(진바이오메드) | 판매원 신홍

| 용도 Palatal에 식립하여 구치부를 후방 이동시킬 때 사용하는 플레이트

| 특징

- Palatal에 식립하여 구치부 후방 이동시 사용
- Incision과 절개 없이 사용 가능하며, 기존 고정원보다 많이 당길 수 있음
- Class 2, 3가 심한 환자의 경우 급속교정 가능

| 포장 및 구성 1개

| 코드 번호

| 품목명                              | 코드     |
|----------------------------------|--------|
| MCPA 2hole JBKP005               | 266373 |
| MCPA 3hole JBKP004               | 266372 |
| Micro Auto Screw 2.0/10 JBAS2010 | 266374 |
| Micro Auto Screw 2.0/8 JBAS2008  | 266375 |

## C-TUBE PLATE | 씨튜브 플레이트

SKELETAL ANCHORAGE PRODUCTS



| 코드 번호

1. C-Plate System

| 품목명                          | 코드     |
|------------------------------|--------|
| C-Tube Plate 001 JBOP001     | 249160 |
| C-Tube Plate 001S JBOP001S   | 249161 |
| C-Tube Plate 001-1 JBOP001-1 | 249162 |
| C-Tube Plate 001-2 JBOP001-2 | 249163 |
| C-Tube Plate 001-3 JBOP001-3 | 249164 |
| C-Tube Plate 001-4 JBOP001-4 | 249165 |
| C-Tube Plate 002 JBOP002     | 249166 |
| C-Tube Plate 003 JBOP003     | 249167 |

2. Micro Auto Screw

| 품목명                               | 코드     |
|-----------------------------------|--------|
| Micro Auto Screw 1.5/4 JBAS001    | 249172 |
| Micro Auto Screw 1.5/5 JBAS002    | 249173 |
| Micro Auto Screw 1.5/6 JBAS003    | 249174 |
| Micro Auto Screw 1.5/7 JBAS004    | 249175 |
| Micro Auto Screw 1.7/5 JBAS17-005 | 249177 |
| Micro Auto Screw 1.7/6 JBAS17-006 | 249178 |

| 제조원 JIN BIOMED(진바이오메드) | 판매원 신홍

| 용도 잇몸을 절개하여 식립하는 교정용 플레이트

| 특징

- Bio 교정에서 쓰이는 장치로 Tube를 지는 교정용 초소형 마이크로 플레이트
- T, I 타입 등 다양한 타입이 존재함
- TAD장치의 식립이 어려울 시, 큰 제약 없이 식립 가능
- 타입을 가리지 않고 Neck을 쉽게 구부릴 수 있음
- 전치부 Intrusion 및 구치부 후방 이동 시 사용

| 포장 및 구성 1개

## JIN-E SCREW | 지니 스크류

SKELETAL ANCHORAGE PRODUCTS



| 제조원 JIN BIOMED(진바이오메드) | 판매원 신홍

| 용도 치아 교정 시 사용하는 고정원 스크류

| 특징

- Skeletal Anchorage Product 중 하나인 Screw 제품
- '022' 와이어 통과 가능
- C-Tube 핸드 바디와 호환 가능
- Double-Neck Design으로 두 개 이상의 탄성 제품을 사용할 수 있음
- 높은 절삭력과 강한 고정력을 지님

| 포장 및 구성 1개

| 코드 번호

1. JIN-E Screw

| 품목명                        | 코드     |
|----------------------------|--------|
| Jin-E Screw 1.6/6 JBOS100  | 249181 |
| Jin-E Screw 1.6/8 JBOS200  | 249182 |
| Jin-E Screw 1.6/10 JBOS300 | 249183 |

2. Accessories

| 품목명                    | 코드     |
|------------------------|--------|
| Shaft Angle(s) JBOS023 | 249191 |
| Shaft Angle(m) JBOS033 | 249190 |
| Shaft Handle JBOS073   | 249189 |

## SKELETAL ANCHORAGE PRODUCTS | 스켈레탈 앵커리지 프로덕트

SKELETAL ANCHORAGE PRODUCTS



| 제조원 JIN BIOMED(진바이오메드) | 판매원 신홍

| 용도 C-tube or Screw 식립할 때 사용하는 핸들 및 샤프트

| 특징

- Skeletal Anchorage Product용 Instruments

| 포장 및 구성 1개

| 코드 번호

Instruments

| 품목명                          | 코드     |
|------------------------------|--------|
| Driver Handle(m) DH100M      | 249185 |
| Screw Block SB100            | 259070 |
| Cross Shaft Angle(m) JBAS033 | 249187 |
| Cross Shaft Angle(s) JBAS023 | 249188 |
| Cross Shaft Handle JBAS073   | 249186 |

## PREFORMED LIGATURE WIRES

프리폼드 리거쳐 와이어

INTRAORAL PRODUCT | 117326~



| 제조원 ORMCO(옵코) | 판매원 신흥

| 용도 브라켓에 와이어를 결찰 시 사용하는 제품

| 특징

- Ormco의 Preformed Ligature Wire는 크롬 알로이 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 커팅 시 모든 Ligature Tying Pliers에 알맞은 넉넉한 길이

| 포장 1,000개 / 팩


| 코드 번호

| Long Ligature Ties |          | Mini Ligature Ties |          |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| 치수                 | Code No. | 치수                 | Code No. |
| .009               | 270-0009 | .010               | 270-0001 |
| .010               | 270-0010 |                    |          |
| .011               | 270-0011 |                    |          |
| .012               | 270-0012 |                    |          |

## MINI-TWISTED KOBAYASHI LIGATURES

미니 트위스티드 고바야시 리거쳐

INTRAORAL PRODUCT | 117330~

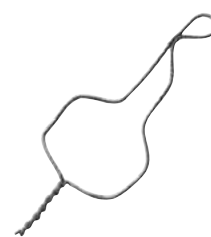

| 제조원 ORMCO(옵코) | 판매원 신흥

| 용도 브라켓에 와이어를 결찰 시 사용하는 제품

| 특징

- 모든 종류의 브라켓에 쉽게 결찰 가능

| 코드 번호

| 구분                   | 크기   | 코드 번호    | 포장       |
|----------------------|------|----------|----------|
| Mini Kobayashi Hooks | .012 | 271-0000 | 100개 / 팩 |
| Mini Kobayashi Hooks | .014 | 271-0001 |          |
| Kobayashi Hooks      | .012 | 271-0012 | 100개 / 팩 |
| Kobayashi Hooks      | .014 | 271-0014 |          |
| Kobayashi Hooks      | .016 | 271-0016 |          |

## TEFLON - COATED LIGATURE WIRES

테플론 코티드 리거쳐 와이어

INTRAORAL PRODUCT | 117335



| 제조원 ORMCO(옵코) | 판매원 신흥

| 용도 브라켓에 와이어를 결찰 시 사용하는 제품

| 특징

- Steel Ligatures의 강도와 안정성을 제공하면서, 투명 브라켓 사용 시 심미성을 보장
- Teflon Coating은 변색이나 코팅 벗겨짐이 일어나지 않음

| 포장 100개 / 팩

| 코드 번호 272-0012

## NI-TI SPRINGS

나이타이 스프링

INTRAORAL PRODUCT | 109001~



| 제조원 ORMCO(옵코) | 판매원 신흥

| 용도 치아 공간을 폐쇄하거나 넓힐 때 되는 코일스프링

| 특징

**Ni-Ti Springs-Compression(Open-coil)**

- Cuspid Retraction-Open-Coil Span는 상악 중심과 견치 사이에 장착
- Distalizing Molar/Anterior Unraveling
- Compression Spring는 스프링을 활성화시킴

**Ni-Ti Springs-extension(Closed-Coil)**

- Cuspid Retraction & Anterior Retraction

Open Coil Spring (3개 / 팩)

| Length | Force  | Compression(Open Coil) |             |
|--------|--------|------------------------|-------------|
|        |        | Coil I.D               | Part Number |
| 17.8cm | Light  | .010 × .030            | 221-5510    |
| 17.8cm | Medium | .012 × .030            | 221-5512    |
| 17.8cm | Heavy  | .014 × .036            | 221-5514    |

Closed Coil Spring (10개 / 팩)


| Length | Force  | Extension(Closed Coil) |             |
|--------|--------|------------------------|-------------|
|        |        | Wire Size              | Part Number |
| 9mm    | Light  | .010 × .030            | 222-5610    |
| 12mm   | Medium | .010 × .030            | 222-5612    |
| 9mm    | Heavy  | .010 × .030            | 222-5620    |



## CHROME ALLOY COIL SPRINGS

크롬 알로이 코일 스프링

INTRAORAL PRODUCT | 124425~

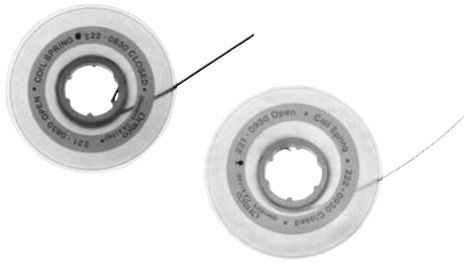

| 제조원 ORMCO(움코) | 판매원 신홍

| 용도 치아 이동을 위해 탄성체 대신 사용

| 특징

- 고탄성의 Spring은 교정치료 시 접합도가 좋음
- Chrome Alloy 재질

| 포장 및 구성 1개


| 코드 번호

| Closed Coil Spring | Code No. | Closed Coil Spring | Code No. |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| .008 × .030        | 222-0830 | .009 × .030        | 221-0930 |
| .009 × .030        | 222-0930 | .010 × .030        | 221-1030 |
| .010 × .030        | 222-1030 |                    |          |

## CRIMPABLE BALL HOOK

크림퍼블 볼 훅

INTRAORAL PRODUCT | 117467

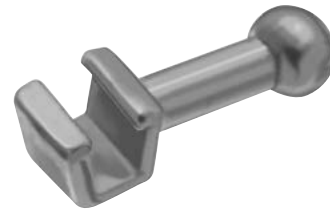

| 제조원 ORMCO(움코) | 판매원 신홍

| 용도 와이어에 삽입하여 Hook으로 사용

| 특징

- Archwire의 원하는 위치에 Crimp하여 사용하며 Kobayashi Hook이나 Posted Archwire 대신에 사용


| 포장 및 구성 50개 / 팩

| 코드 번호 704-9000

## CRIMPABLE EDGEWISE ARCH HOOK / STOPS

크림퍼블 엣지와이즈 아치 훅 / 스탑

INTRAORAL PRODUCT | 117454~

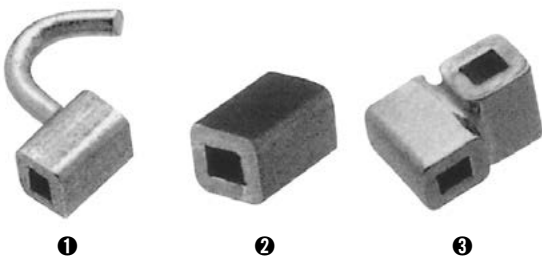

| 제조원 ORMCO(움코) | 판매원 신홍

| 용도 와이어에 삽입하여 Hook or Stop으로 사용

| 특징

- Archwire에 삽입하여 Crimp하여 사용하며, 무겁고 강한 Tube Type으로 변형이 없음

| 포장 및 구성 10개 / 팩

|                    | 크기                                       | Code No. | 형태 |
|--------------------|------------------------------------------|----------|----|
| Hook-2mm           | .018 × .025                              | 663-0218 | ①  |
|                    | .022 × .028                              | 663-0222 |    |
| Stop or Spacer-2mm | .018 × .025                              | 624-1825 | ②  |
|                    | .022 × .028                              | 624-2228 |    |
| 10개 패키지            | Criss-Cross .022 × .028 Rectangular Tube | 199-0895 | ③  |

## LINGUAL BUTTONS

링귤 버튼

INTRAORAL PRODUCT | 117448~



| 제조원 ORMCO(움코) | 판매원 신홍

| 용도 설측에 붙여서 치아 견인 용도로 활용

| 특징

- 일체형 구조로 되어있고, 환자의 편의를 위해 Round처리 되어있음

| 포장 및 구성 10개 / 팩

| 내역                          | Code No. |
|-----------------------------|----------|
| Flat - Loose or Prewelded   | 610-0001 |
| Molar - Loose or Prewelded  | 610-0003 |
| Curved - Direct Bond Pad    | 300-0096 |
| Curved - Loose or Prewelded | 610-0002 |
| Flat - Direct Bond Pad      | 300-0097 |
| Plastic Button - Loose      | 610-0010 |

## BURSTONE PRECISION LINGUAL BRACKET | 버스톤 프리시전 링귤 브라켓

INTRAORAL PRODUCT | 108440~



| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신홍

| 용도 설측에 붙여 Lingual Arch용으로 사용

| 특징

- Dr. Burstone의 Precision Lingual Arch에 사용됨


| 포장 및 구성 10개 / 팩

| 코드 번호

- .032 × .032 Arched(최소 단위 : 10개)
- Upper First Molar(Left/Right) +12° Torque : 134-0001
- Lower First Molar(Left/Right) - 6° Torque : 134-0010

## PRECISION™ LINGUAL HINGE CAP | 프리시전 링귤 힌지캡

INTRAORAL PRODUCT | 108441~

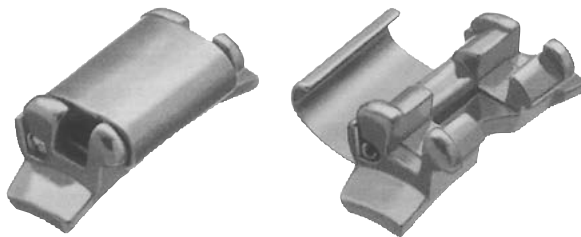

| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신홍

| 특징


- Lingual Wire의 삽입과 제거의 어려움을 최소화시킴
- Hinge Cap의 윤곽 때문에 Sheath의 전반적인 치수가 작아졌으며, 환자의 편안함이 증대됨
- .032 × .032(Square)와 .032(Round) 와이어에 사용할 수 있도록 제작

| 코드 번호

- Upper First Molar(Left/Right) +12° Torque : 134-0005
- Lower First Molar(Left/Right) - 6° Torque : 134-0015
- Lingual Hinge Cap Opening Tool : 802-1001

## HORIZONTAL LINGUAL SHEATHS | 호리존탈 링귤 쉬스

INTRAORAL PRODUCT | 117457~

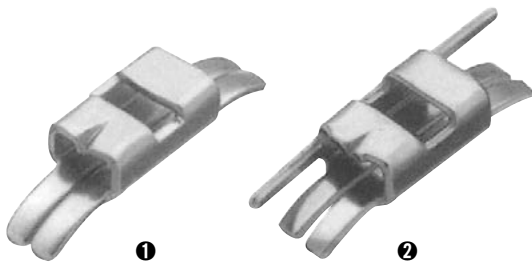

| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신홍

| 용도 고무줄을 걸거나 와이어 장착을 위해 사용

| 특징

- Window과 Locking Indent가 있음. Locking Indent(홈)는 아치 와이어의 위치를 고정시키며, 와이어를 정확한 위치에 고정되게 유지

| 구성 (최소 단위 : 10개)

|                     | 크기               | Code No. | 형태 |
|---------------------|------------------|----------|----|
| Double Wire 용       | .036 Round       | 672-3672 | ①  |
| Mesiodistal Hook장착형 | .036 Round UL/LR | 673-3672 | ②  |
| Double Wire 용       | .036 Round UR/LL | 674-3672 |    |

## BLUGLOO | 블루글루

BKT ADHESIVE | 150420~



| 제조원 ORMCO(움코) | 판매원 신홍

| 용도 브라켓 본딩 시 사용하는 본딩제

### | 특징

- Two-Way Color 본딩제

| 본딩  | 처치 | 클린업 |
|-----|----|-----|
| 파란색 | 무색 | 파란색 |

- 심미 브라켓에 최적화

- Light-Cure(광중합) 방식

### | 포장 및 구성

키트 : Syringe(4g)×2, Ortho solo(5ml), Etching solution(10ml), Sealant applicator brushes(38개), Spatulas(75개)

| 품목 코드 Syringe Refill : 740-0272

Syringe Kit : 740-0274

| 유효 기간 1년(실온 보관)

## GRENGLOO | 그렌글루

BKT ADHESIVE | 224799~



| 제조원 ORMCO(움코) | 판매원 신홍

| 용도 브라켓 본딩 시 사용하는 본딩제

### | 특징

- Two-Way Color 본딩제

| 본딩 | 처치 | 클린업 |
|----|----|-----|
| 녹색 | 무색 | 녹색  |

- 메탈 브라켓에 최적화

- Light Cure(광중합) 방식

### | 포장 및 구성

키트 : Syringe(4g)×2, Ortho Solo(5ml), Etching Solution(10ml), Sealant Applicator Brushes(38개), Spatulas(75개)

| 품목 코드 Syringe Refill : 740-0321

Syringe Kit : 740-0320

| 유효 기간 2년(실온 보관)

## ENLIGHT® | 엔라이트

BKT ADHESIVE | 110681~



| 제조원 ORMCO(움코) | 판매원 신홍

| 용도 브라켓 본딩 시 사용하는 본딩제

### | 특징

- 광중합형 어드히시브

- 조작성이 좋은 Bis-GMA레진

- 시린지 타입

- 불소 방출 실란트/본드 강화제

- 라이트 부재 시 지속적 경화를 위한 Dark-Cure 메커니즘

### | 포장 및 구성

키트 : Syringe(4g)×4, Ortho Solo(5ml), Etching Solution(10ml), Sealant Applicator Brushes(75개), Spatulas(75개), Mixing Pad

| 품목 코드 Syringe Refill : 740-0195

Syringe Kit : 740-0198

| 유효 기간 1년 6개월(실온 보관)

## OPTIBAND ULTRA | 옵티밴드 울트라

BKT ADHESIVE | 179589~



| 제조원 ORMCO(움코) | 판매원 신홍

| 용도 밴드를 본딩 시 사용

### | 특징

- 싱글 페이스트 타입, 광중합형 밴드 시멘트

- 일회용 팁으로 Direct Banding을 함으로써 Mixing타입 제품에서의 Mixing시간과 Mixing실패 위험을 걱정하지 않아도 되며, 교차 감염의 위험을 줄임

- 특수한 화학 작용 메커니즘으로 접합 강도를 높여 안정성을 높임

- 뛰어난 불소 방출 시스템으로 탈회를 막아 치아를 보호해 줌

- Blue Color로 Banding 혹은 Debanding시에 잉여분 제거 용이

| 포장 및 구성 키트 : Syringe(1.8g)×5개, 일회용 Tip(10개)


| 품목 코드 740-0293

| 유효 기간 2년(실온 보관)

## SEPARATORS

세퍼레이터

ELASTIC & POWER PRODUCT | 110581

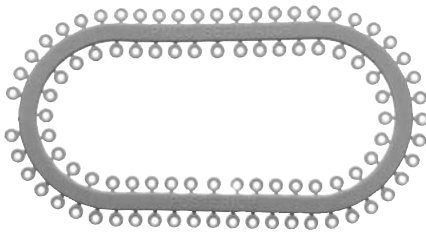

| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신흥

| 용도 교정용 밴드를 넣기 위해 치간을 넓히기 위해 사용

| 특징

- 방사성 불투과성
- 일정한 힘을 제공함
- 눈에 잘 띄는 블루 컬러

| 포장 1,000개 / 팩

| 품목 코드 640-0080

| 유효 기간 30개월

## SHORT STICK POWER "O" S

쇼트 스틱 파워 오링

ELASTIC & POWER PRODUCT | 125524~



| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신흥

| 용도 Ligature 대응으로 사용

| 특징

- Ligature Wire 대신 사용 - 강도가 더욱 높아짐
- 10개 단위로 잘라져 있어 한 악당 사용하도록 되어 있어 사용하기 편리해졌으며 교차 감염의 위험을 줄임

| 포장 및 구성 100개 / 팩

| 품목 코드

| Size | Clear    | Gray     |
|------|----------|----------|
| .120 | 640-1264 | 640-1265 |

| 유효 기간 30개월

## GENERATION II POWER CHAIN

파워 체인

ELASTIC & POWER PRODUCT | 110542~



| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신흥

| 용도 치아에 지속적 힘을 가하여 주는 탄성체

| 특징

- 천연고무로 오랜 기간 동안 일정한 힘을 제공함
- Closed, Open, Wide Space
- 체인의 신축성에서 임상적 선두

| 포장 및 구성 1개

| 코드 번호 (1Roll 3.9M)

|                              | Clear    | Gray     |
|------------------------------|----------|----------|
| Generation II (Closed space) | 639-0002 | 639-0001 |
| Generation II (Open space)   | 639-0004 | 639-0003 |
| Generation II (Wide space)   | 639-0019 | 639-0018 |

| 유효 기간 3년

## POWER THREAD & TUBE

파워 스레드 & 튜브

ELASTIC & POWER PRODUCT | 110604~



| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신흥

| 용도 치아에 지속적 힘을 가하여 주는 탄성체

| 특징

- Power Thread : 지속적이고 일관된 탄성 유지, 회전 조절 및 수정, Retraction에 사용

| Size | Length | Clear    | Gray     |
|------|--------|----------|----------|
| .025 | 7.62M  | 640-1026 |          |
| .030 | 7.62M  | 640-1031 | 640-1030 |

- Power Tube : 안전한 매듭을 위한 Hollow channel 적용

| Size | Length | Clear    |
|------|--------|----------|
| .030 | 7.62M  | 640-4031 |

| 포장 및 구성 1개

| 유효 기간 30개월

## ZOO PACK ELASTICS | 쥬 팩 엘라ستيك

ELASTIC & POWER PRODUCT

| 제조원 ORMCO(음코) | 판매원 신홍

| 용도 교정용 탄성체로 치아 이동 시 힘을 주기 위해 사용

| 특징

- 고품질의 Latex
- 일정한 힘으로 당김
- 신축성은 본 직경의 3배까지 늘어남

| 포장 및 구성

- Intraoral : 5000개 / 팩
- Extraoral : 1,500개 / 팩


| 유효 기간 3년



| 구분               | Intraoral Elastic            |                          |                                  |                            |                               | Extraoral Elastic        |                           |
|------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Size<br>Strength | Light<br>2 oz<br>(60gm)      | Medium<br>3 oz<br>(85gm) | Med / Heavy<br>3.5 oz<br>(100gm) | Heavy<br>4.5 oz<br>(130gm) | Ex / Heavy<br>6 oz<br>(170gm) | Light<br>8 oz<br>(230gm) | Heavy<br>14 oz<br>(400gm) |
| 1/8"<br>3.18mm   | ○<br>Hummingbird<br>630-0010 |                          | ●<br>Chipmunk<br>630-0030        |                            |                               |                          |                           |
| 3/16"<br>4.76mm  | ○<br>Quail<br>630-0011       | ○<br>Otter<br>630-0020   | ●<br>Rabbit<br>630-0031          | ○<br>Kangaroo<br>630-0040  | ●<br>Impala<br>630-0050       | ○<br>Cougar<br>635-0058  |                           |
| 1/4"<br>6.35mm   | ○<br>Owl<br>630-0012         | ○<br>Seal<br>630-0021    | ●<br>Fox<br>630-0032             | ●<br>Bear<br>630-0041      | ●<br>Ram<br>630-0051          | ○<br>Leopard<br>635-0059 |                           |
| 5/16"<br>7.94mm  | ○<br>Parrot<br>630-0013      | ○<br>Dolphin<br>630-0022 | ●<br>Penguin<br>630-0033         | ○<br>Zebra<br>630-0042     | ●<br>Moose<br>630-0052        | ○<br>Panther<br>635-0060 | ○<br>Walrus<br>635-0065   |
| 3/8"<br>9.35mm   | ○<br>Road Runner<br>630-0014 |                          | ○<br>Monkey<br>630-0034          |                            | ○<br>Buffalo<br>630-0053      | ○<br>Tiger<br>635-0061   | ○<br>Elephant<br>635-0066 |
| 1/2"<br>12.7mm   | ○<br>Peacock                 |                          | ○<br>Donkey<br>630-0035          |                            |                               | ○<br>Lion<br>635-0062    | ○<br>Whale<br>635-0067    |
| 3/4"<br>19.1mm   | ○<br>Ostrich<br>630-0017     |                          |                                  |                            |                               |                          |                           |

## CERVICAL NECK PAD | 써비컬 넥패드

EXTRAORAL PRODUCT | 110643~

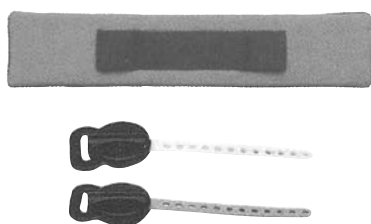

| 제조원 ORMCO(음코) | 판매원 신흥

| 용도 Molar의 이동을 도와주거나 뼈의 성장을 조절

| 포장 및 구성 1개

| 품목 코드

| Color    |          |          |          |          |          | Release Modules |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Denim    | Pink     | Yellow   | Blue     | Green    | Black    | Gray(Heavy)     |
| 715-1001 | 715-1002 | 715-1003 | 715-1004 | 715-1005 | 715-1006 | 715-1021        |

## HIGH PULL STRAPS | 하이 풀 스트랩

EXTRAORAL PRODUCT | 110649~



| 제조원 ORMCO(음코) | 판매원 신흥

| 용도 Molar의 이동을 도와주거나 뼈의 성장을 조절

| 포장 및 구성 1개

| 품목 코드

| Color    |          |          | Release Modules |
|----------|----------|----------|-----------------|
| Black    | Pink     | Yellow   | White(Medium)   |
| 715-1011 | 715-1012 | 715-1013 | 715-1020        |

## AD PROTRACTION FACEMASK | AD 프로트랙션 페이스 마스크

EXTRAORAL PRODUCT | 110654~



| 제조원 ORMCO(음코) | 판매원 신흥

| 용도 클래스3의 부정교합에 사용

| 특징 - 일상 생활 시 장착이 용이하고 취침에 방해가 되지 않음  
- Ormco Elastic Whale(14oz, 1/2")와 Walrus(14oz, 5/16")와 사용을 추천


| 포장 및 구성 1개

| 품목 코드

| 내역                                    | Code No. |
|---------------------------------------|----------|
| Blue Facemask                         | 716-0001 |
| Lavender Facemask                     | 716-0002 |
| Chin and Forehead Replacement Pads(3) | 716-0003 |

## SR FACEBOW | 에스알 페이스 보우

EXTRAORAL PRODUCT

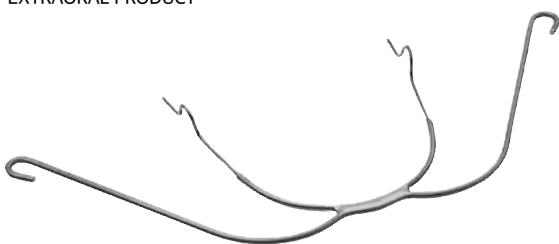

| 품목 코드

| Inner Arch                                 | Style       | .045     |
|--------------------------------------------|-------------|----------|
| Long Outer Bow with Horizontal Hooks       |             |          |
| Size 3                                     | Omega Loops | 200-0203 |
| Size 4                                     | Omega Loops | 200-0204 |
| Size 5                                     | Omega Loops | 200-0205 |
| Small                                      | Plain       | 200-0207 |
| Mini-Short Outer Bow with Horizontal Hooks |             |          |
| Size 1                                     | Omega Loops | 200-0241 |
| Size 2                                     | Omega Loops | 200-0242 |
| Size 3                                     | Omega Loops | 200-0243 |
| Size 4                                     | Omega Loops | 200-0244 |
| Size 5                                     | Omega Loops | 200-0245 |

| 제조원 ORMCO(음코) | 판매원 신흥

| 용도 Headgear 사용 시 쓰는 제품

| 특징 Headgear 사용 시 함께 사용하며, Outerbow의 Size에 따라 Long / Short / Mini-Short / Super-Short으로 나뉘며 한국인에게는 일반적으로 Short과 Mini-Short이 적합

| 포장 및 구성 1개

| Short Outer Bow with Horizontal Hooks       |             |          |
|---------------------------------------------|-------------|----------|
| Size 1                                      | Omega Loops | 200-0221 |
| Size 2                                      | Omega Loops | 200-0222 |
| Size 3                                      | Omega Loops | 200-0223 |
| Size 4                                      | Omega Loops | 200-0224 |
| Size 5                                      | Omega Loops | 200-0224 |
| Large                                       | Plain       | 200-0228 |
| Super-Short Outer Bow with Horizontal Hooks |             |          |
| Size 2                                      | Omega Loops | 200-0262 |
| Size 3                                      | Omega Loops | 200-0263 |
| Size 4                                      | Omega Loops | 200-0264 |
| Size 5                                      | Omega Loops | 200-0265 |
| Large                                       | Plain       | 200-0268 |



## PLIER & CUTTER | 플라이어 & 커터

INSTRUMENT

| 제조원 PROTECT(프로텍트) | 판매원 신홍, 디브이홀딩스

### | 특징

- 고압 및 온도 살균에 적합
- 고품질 경첩은 유연성과 무결성을 보장



**270407 Weingart Plier #5011 :**  
톱니 모양으로 된 다용도 플라이어



**270414 Three Prong Wire Bending Plier #5016 :**  
모든 종류의 합자, 특히 Niti 와이어를 형성하고 구부리는 데 사용



**270406 Young Loop Bending Plier #5010 :**  
정사각형 또는 직사각형 와이어에 동일한 루프를 만들




**270411 Posterior Band Removing Plier #5014-1 :**  
교정용 밴드 제거하는 데 사용 (전방)



**270404 Tweed Plier #5008 :**  
모든 유형의 루프 조정 가능



**270408 Nance Loop Bending Plier #5012 :**  
루프를 구부리는 데 사용

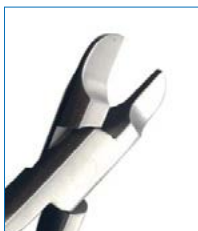

**270402 Torque Bending Plier #5006 :**  
Edgewise 와이어의 특정 부분에 토크를 적용, 일반적으로 쌍으로 사용



**270418 Multi-Function Plier #5020 :**  
가벼운 와이어와 U 루프를 구부리거나 단단한 와이어 절단 등 다용도 플라이어



**270400 Light Wire Plier With Cutter #5004 :**  
다양한 크기의 섬세한 루프와 스프링에 적합하고 절단도 가능함



**270416 Elastic Plier #5018 :**  
어금니 접촉점 아래에 엘라스토머 분리를 쉽게 놓을 수 있도록 앞쪽으로 구부리는 데 사용



## PLIER & CUTTER | 플라이어 & 커터

INSTRUMENT

| 제조원 PROTECT(프로텍트) | 판매원 신흥, 디브이홀딩스

### | 특징

- 고압 및 온도 살균에 적합
- 고품질 경첩은 유연성과 무결성을 보장



**270397 Light Wire Plier #5001 :**  
다양한 크기의 섬세한 루프와 스프링에 적합



**270419 Distal End Bending Plier #5027 :**  
1mm 스텝 밴드를 쉽게 형성할 수 있도록 설계됨  
(양손 사용 가능)



**270403 Kims Combination Plier #5007 :**  
다중 루프 가장자리 아치 와이어를 구부리는 데 사용, 중간 부분에 커터 포함



**270415 Crimpable Hook Plier #5017 :**  
Hook을 아치 와이어에 압착하는 데 사용



**270405 Hows Plier #5009 :**  
아치 와이어, 협측 튜브 등 장착 및 제거에 사용




**270417 Convertible Cap Removing Plier #5019 :**  
Convertible 튜브의 뚜껑을 제거하는 데 사용



**270409 Brackets Removing Plier-Front #5013-1 :**  
앞쪽 브라켓 제거하는 데 사용



**270410 Brackets Removing Plier-Back #5013-2 :**  
뒤쪽 브라켓 제거하는 데 사용

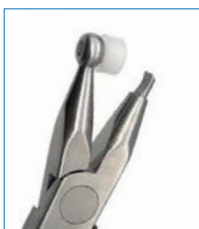

**270413 Adhesive Removing Plier #5015 :**  
에나멜을 손상시키지 않고 치아에 남아있는 접착제를 제거하는 데 사용



**270398 Distal End Cutter #5002 :**  
U 모양 팁을 사용하여 평행한 와이어의 긴 끝을 절단하는 데 사용



**270401 Heavy Wire Cutter #5005 :**  
단단한 와이어 혹은 0.8mm 이하의 Niti 와이어를 절단하는 데 사용



**270399 Ligature Cutter #5003 :**  
Ligature 와이어 및 고무 밴드를 절단하는 데 사용  
(하드 와이어 절단은 불가함)

# HU-FRIEDY LINGUAL COLLECTION | 휴프리디 링귤 컬렉션

## INSTRUMENT

| 제조원 HU-FRIEDY(휴프리디) | 판매원 신흥

| 용도 설측 교정 시에 사용하는 교정 기구


| 포장 및 구성 1개



**Lingual Distal End Cutter**  
#678-700  
Wire Size : .012" to .018"



**Lingual Pin & Lig Cutter**  
#678-701  
Wire Size : <= .012"

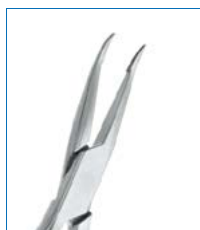

**Lingual Weingart Pliers**  
#678-702  
Wire Size : <= .030"



**Lingual Weingart Pliers, 90° Bend**  
#678-702-90  
Wire Size : <= .030"



**Lingual Bracket Removing Pliers**  
#678-703




**Lingual Hammerhead NiTi Pliers**  
#678-704  
Wire Size : <= .025"




**Lingual Hammerhead NiTi Pliers  
With Serrations**  
#678-704SER  
Wire Size : <= .025"



**Lingual Mathieu Pliers**  
#678-705

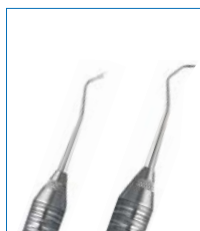

**Lingual Ligature Director**  
#678-706  
Wire Size : <= .021" × .025"

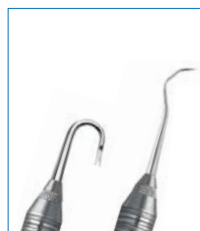

**Lingual Ligature Director, U Shape**  
#678-707  
Wire Size : <= .021" × .025"

# HU-FRIEDY SLIM COLLECTION | 휴프리디 슬림 컬렉션

INSTRUMENT

| 제조원 HU-FRIEDY(휴프리디) | 판매원 신홍

| 용도 교정용 Plier로 Slim한 Type의 기구


| 포장 및 구성 1개



**Slim Flush Cut & Hold Distal End Cutter**  
**#678-113**  
 작업 공간이 기존보다 50% 감소  
 Buccal Tube의 Distal 쪽에 초과된 Wire를 완벽히 커팅  
**Wire Size :** <=.012" to .021" × .025"



**Slim Micro Cutter**  
**#678-500**  
 678-110과 비교해 팁 사이즈 13% 감소  
 엘라스틱 슬림한 사이즈로 Ligature Wire, Elastic 제거가 손쉬움  
**Wire Size :** <=.008" to .012"

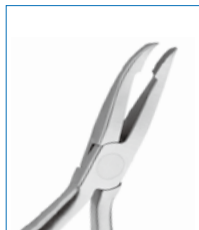


**Ultra Slim Weingart Pliers**  
**#678-501**  
 678-201과 비교해 20%이상 작업 공간 감소  
 톱니 모양의 슬림한 팁 향상된 그립감과 좁은 부위 접근이 용이  
**Wire Size :** <=.030"




**Slim Hammerhead NiTi Pliers**  
**#678-502**  
 678-327과 비교해 10%이상 감소된 작업 공간으로 환자의 편안함 증대  
 NiTi Wire만 사용(열처리 필요없음)  
**NiTi Wire Size :** <=.025"



**Slim Band Removing Pliers**  
**#678-503**  
 678-207과 비교해서 21% 가늘어짐  
 접근이 용이하고 환자의 불편함 감소  
**Wire Size :** <=.012" to .021" × .025"

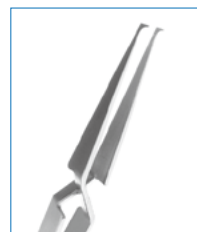

**Slim Direct Bond Bracket Tweezers**  
**#678-504**  
 678-212에 비해 작업 공간 50% 감소

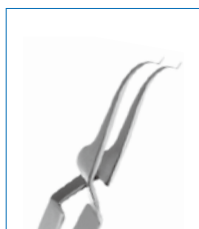

**Slim Buccal Tube Bonder Tweezers**  
**#678-505**  
 Buccal Tube 트위저



**Distal Cinch Back Hand Instrument**  
**#678-506**  
 Buccal Tube의 Distal쪽 초과된 Wire를 Cinch Back하는 데 사용  
 슬림한 팁으로 구치부에서의 접근 용이함  
**wire size :** <=.021" × .025" ss Wire

## DISTAL END CUTTER | 디스탈 엔드 커터

INSTRUMENT

| 제조원 HU-FRIEDY(휴프리디) | 판매원 신홍

| 용도 교정용 Plier로 Slim한 Type의 기구

| 포장 및 구성 1개



**Universal Cut &  
Hold Distal End Cutter**  
#678-101

구강 내 작업에서도 커팅된 Wire를 안전하게 안전하게 홀드시켜 줌  
Smooth, Tapered Tip으로 환자에게 편안함 제공

**Wire Size :**  $\leq .012" \sim .021" \times .025" / .30\text{mm} \sim .53 \times .64\text{mm}$

#678-101L Long Handle



**Flush Cut Distal End Cutter,  
No Hold**  
#678-102

**Wire Size :**  $\leq .021" \times .025" / .53 \times .64\text{mm}$



**Flush Cut &  
Hold Distal End Cutter**  
#678-111

구강 내 작업에서도 커팅된 Wire를  
안전하게 홀드시켜 줌

**Wire Size :**  $\leq .020" / .51\text{mm}$

## PIN AND LIGATURE CUTTER | 핀 앤드 리거처 커터

INSTRUMENT

| 제조원 HU-FRIEDY(휴프리디) | 판매원 신홍

| 용도 교정용 Plier로 Slim한 Type의 기구

| 포장 및 구성 1개



**Multi-Use Cutter**  
#678-105

Perma Sharp Tip으로 내구성이 강함

**Wire Size :**  $\leq .015" / .38\text{mm}$



**Mini Pin & Ligature Cutter**  
#678-106

Slim Profile로 접근하기 힘든 부위도 가능

Perma Sharp Tip으로 내구성 강함

**Wire Size :**  $\leq .012" / .30\text{mm}$



**Micro-Mini Pin & Ligature  
CUTTER**  
#678-107

Ultra Slim Profile로 접근하기 힘든 부위도  
가능 Perma Sharp Tip으로 내구성 강함

**Wire Size :**  $\leq .012" / .30\text{mm}$

#678-107L Long Handle



**Micro-Mini Pin &  
Ligature Cutter, 15°**  
#678-109

15° Offset Tip은 접근하기 어려운 부위에  
쉽게 접근 가능

Perma Sharp Tip으로 내구성 강함

**Wire Size :**  $\leq .012" / .30\text{mm}$



**Micro Cutter**  
#678-110

Tip사이즈 축소, Perma Sharp Tip으로  
내구성이 강함

**Wire Size :**  $\leq .012" / .30\text{mm}$

## HARD WIRE CUTTER | 하드 와이어 커터

INSTRUMENT

| 제조원 HU-FRIEDY(휴프리디) | 판매원 신홍

| 용도 교정용 Cutter로 와이어를 자를 때 사용

| 포장 및 구성 1개



**Hard Wire Cutter, 15°**

**#678-103**

15° Offset Tip은 접근하기 어려운 부위에  
쉽게 접근 가능

**Wire Size :**  $\leq .022" \times .028"/$   
 $.56 \times .71\text{mm}$



**Hard Wire Cutter**

**#678-104**

작은 나선형 루프를 정확히 형성하고  
인트라오랄 팁을 구부리는 데 유용함

**Wire Size :**  $\leq .022" \times .028"/$   
 $.56 \times .71\text{mm}$

## UTILITY PLIER | 유틸리티 플라이어

INSTRUMENT

| 제조원 HU-FRIEDY(휴프리디) | 판매원 신홍

| 용도 다용도로 사용하는 도구

| 포장 및 구성 1개



**Weingart Pliers**

**#678-201**

톱니 모양으로 된 다용도 플라이어  
Tapered된 32° 각진 팁으로 아치 와이어  
장착 및 제거 시 사용

**#678-201L** Long Handle



**Slim Weingart Pliers**

**#678-202**

톱니 모양으로 된 다용도 플라이어



**How Plier**

**#678-203**

톱니 모양의 팁으로 Archwire, Pins  
다른 보조 제품들의 장착 및 제거 시 사용



**How Plier, Offset**

**#678-204**

설측 등 접근이 힘든 부위에  
쉽게 접근할 수 있도록 40° 각진 팁을  
제외하고는 678-203과 동일

# WIRE FORMING PLIER | 와이어 포밍 플라이어

INSTRUMENT

| 제조원 HU-FRIEDY(휴프리디) | 판매원 신홍

| 용도 와이어를 구부리거나 모양을 만들기 위해 사용

| 포장 및 구성 1개



**Jarabak Plier**  
#678-301

다재다능한 라이트 와이어 밴딩 플라이어  
Grooves는 Loop을 정확하게 밴딩하고  
클로징 할 수 있도록 해 줌  
**Wire Size** :  $\leq .020"/.51\text{mm}$



**Three Jaw Plier**  
#678-302

와이어를 밴딩하거나 컨투어링하는 데  
유용함  
**Wire Size** :  $\leq .030"/.76\text{mm}$




**Omega Loop Forming Plier**  
#678-303

정확한 Omega Loops을 형성하도록 제작됨  
**직경** : .045", .060", .075"  
**Wire Size** :  $\leq .022" \times .025"/.53 \times .64\text{mm}$



**Bird Beak Plier**  
#678-304

다용도 록 포밍 플라이어  
**Wire Size** :  $\leq .030"/.76\text{mm}$

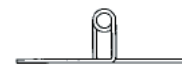

**Tweed Loop Forming Plier**  
#678-306

Bull&Helical Loop을 형성하는 데 사용함  
**직경** : .055", .075", .090"  
**Wire Size** :  $\leq .022" \times .025"/.53 \times .64\text{mm}$



**Arch Bending Plier**  
#678-307

**Blade Width** : .050"  
**Wire Size** :  $\leq .022" \times .025"/.53 \times .64\text{mm}$

#678-307S  
**Blade Width** : .025"



**Rectangular Arch Bending Plier**  
#678-308  
**Blade Width** : .070"



**Lingual Arch Forming Plier**  
#678-309

.030과 .036 링겔 아치 와이어를 Double  
Back, Triple Back Bend를 줄 때 유용함



**Hollow Chop Contouring Plier**  
#678-310

Arch Wire 컨투어링용

**Hollow Chop Plier**  
#678-317

678-310과 동일하며, 반지름이 작음  
**Wire Size** :  $\leq .030"/.76\text{mm}$



**O'brien Plier**  
#678-311

작은 나선형 루프를 정확히 형성하고  
인트라오랄 팁을 구부리는 데 유용함  
**Wire Size** :  $\leq .020"/.51\text{mm}$



# WIRE FORMING PLIER | 와이어 포밍 플라이어

INSTRUMENT

| 제조원 HU-FRIEDY(휴프리디) | 판매원 신홍

| 용도 와이어를 구부리거나 모양을 만들기 위해 사용

| 포장 및 구성 1개



**Mini Three Jaw Plier**  
**#678-312**  
팁이 라운드하여 Light Wire를  
컨투어링하는 데 수월함  
**Wire Size** :  $\leq .030" / .76\text{mm}$



**Marcotte Loop Plier**  
**#678-316**  
Helical Loop와 T Loop 정확한 형성에 사용  
**Wire Size** :  $\leq .022" \times .025" /$   
 $.53 \times .64\text{mm}$



**Light Wire Bird Beak Plier**  
**#678-318**  
일반 버드빅 플라이어보다 Cone이 더  
길어서 Light Wire의 정확한 룹 형성에  
유용함  
**Wire Size** :  $\leq .020" / .51\text{mm}$



**Adams Plier**  
**#678-320**  
**Wire Size** :  $\leq .040" / 1.01\text{mm}$



**V-Stop Plier**  
**#678-321**  
**Wire Size** :  $\leq .022" \times .025" /$   
 $.53 \times .64\text{mm}$



**Mini Three Jaw Plier**  
**#678-322**  
모든 종류의 아치 와이어의 포밍 및  
컨투어링에 사용함 특히 NiTi에 유용함  
**Wire Size** :  $\leq .020" / .51\text{mm}$



**Optical Plier**  
**#678-323**  
**Wire Size** :  $\leq .022" \times .025" /$   
 $.53 \times .64\text{mm}$



**Old Style Loop Plier**  
**#678-324**  
한쪽은 원통형의 Three-Step Beak이며  
다른 한쪽은 삼각형 Beak으로 되어 있어  
Loop을 클로징하거나 포밍하는 데 이상적  
**Wire Size** :  $\leq .022" \times .025" /$   
 $.53 \times .64\text{mm}$



**Bird Beak Pliers With Cutter**  
**#678-325**  
Bends And Cuts  
**Wire Size** :  $\leq .022" \times .025" /$   
 $.53 \times .64\text{mm}$



**Hammerhead Niti Tie-Back Plier**  
**#678-327**  
다용도 NiTi Bender  
**Wire Size** :  $\leq .025" / .63\text{mm}$



**#678-328-20**  
Torquing Pliers With  $.016" / .018"$  Key



**#678-328-21**  
Torquing Pliers With  $.018" / .022"$  Key



## LIGATURE TYING PLIER | 리거쳐 타이밍 플라이어

INSTRUMENT

| 제조원 HU-FRIEDY(휴프리디) | 판매원 신홍

| 용도 Ligature를 묶거나 Elastic을 잡아 뒀을 때 사용

| 포장 및 구성 1개



**Coon Style Ligature Tying Plier**

#678-211

Stainless Ligature Wire를 Tying하는 데 가장 대표적인 플라이어

Wire Size : <=.015"/.38mm



**Steiner Tying Plier**

#678-222

Stainless Ligature Wire를 Tying하는 데 이상적

Wire Size : <=.015"/.38mm



**Ortho Mathieu, Narrow Tip Plier**

#678-330

| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신홍



**Ligature Plier With Notch Tip (Mathieu Style)**

#801-0006

스테인리스 재질, 찢겨짐 없이 엘라스틱 홀드 가능




**Smaha Curved Slimline Sure-Grip Forcep**

#800-8014

Labial 및 Lingual 용으로 아치 와이어를 삽입하거나 꼭 잡을 때 용이

#800-8015

800-8014와 동일, Tip이 Straight 형태

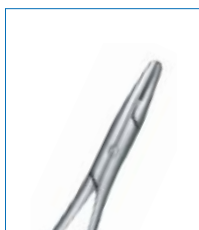

**Ligature Plier(Matieu Style)**

#801-0064

단단하고 라운드한 팁  
Ligature Wire를 Tying하는 데 사용

# LIGATURE DIRECTOR | 리거쳐 디렉터

INSTRUMENT

| 제조원 HU-FRIEDY(휴프리디) | 판매원 신홍

| 용도 교정 시 Ligature할 때 사용

| 포장 및 구성 1개



**Ligature Director  
#800-2104**  
빨간색 소프트 터치 핸들, 열 소독 가능  
링결용 터커



**Ligature Director  
#LD1**



**Ligature Director  
#LDG2**




**Ligature Director Tucker  
#LDT**



**Ligature Director / Scaler  
#678-905**



**Ligature Director  
Band Pusher  
#678-908**

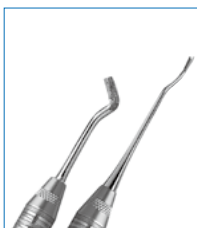

**(LD1/BPS2)  
Ligature Director  
Band Pusher  
#678-912**

## BRACKET HOLDER | 브라켓 홀더(트위저)

INSTRUMENT

| 제조원 HU-FRIEDY(휴프리디) | 판매원 신홍

| 용도 브라켓을 잡을 때 사용하는 기구

| 포장 및 구성 1개



**Direct Bond Bracket Holder**  
#678-212

| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신홍



**Curved Direct Bond Bracket Holder**  
#800-8000  
Labial 및 Lingual용 브라켓 홀더



**Direct Bond Bracket Holder**  
#803-0175  
톱니 모양의 팁, Stainless Steel Locking 브라켓 홀더

## BRACKET DEBONDING PLIER | 브라켓 디본딩 플라이어

INSTRUMENT

| 제조원 HU-FRIEDY(휴프리디) | 판매원 신홍

| 용도 브라켓을 치아에서 제거 시에 사용하는 기구

| 포장 및 구성 1개



**Angulated Bracket Removing Plier**  
#678-220L



**Bracket Removing Plier**  
#678-219  
Metal, Ceramic, Resin Bracket 등 모든 타입과 잘 맞음

| 제조원 ORMCO(옴코) | 판매원 신홍



**Damon Clear Debonding Plier**  
#866-4019  
Damon Clear 브라켓 전용 디본딩 기구  
기구 양쪽 팁이 BKT Wing을 잡고  
Wedge를 교합면 쪽에 위치시킨 후  
핸들을 살짝 잡으면 '딱' 소리와 함께 떨어짐

## BAND (ADHESIVE) REMOVING PLIER | 밴드 리무빙 플라이어

INSTRUMENT

| 제조원 HU-FRIEDY(휴프리디) | 판매원 신홍

| 용도 교정용 Band를 뺄 때 사용

| 포장 및 구성 1개



**Adhesive Removing Plier**  
**#678-206**  
 교체 가능한 Blade는 디본딩 후  
 잉여 컴포지트 재료 제거 시 유용함  
**#678-014A** 6.3mm pad (6)  
**#678-011** Replacement Blade



**Posterior Band  
 Removing Plier - Long**  
**#678-207**  
**#678-014** 6.3mm pad (6)  
**#678-036** 4.8mm pad (6)



**Posterior Band  
 Removing Plier - Short**  
**#678-208**  
**#678-014** 6.3mm pad (6)  
**#678-036** 4.8mm pad (6)

## BAND INSTRUMENT | 밴드 인스트루먼트

INSTRUMENT

| 제조원 ORMCO(옵코) | 판매원 신홍

| 용도 교정용 Band를 깎을 때 사용

| 포장 및 구성 1개



**Orthodontic Band  
 Pusher/Scaler**  
**#803-0160**



**Band Pusher/  
 Burnisher**  
**#844-0011**  
 스테인리스 스틸 재질, 내구성 강함



**Band Burnisher**  
**#844-0031**  
 톱니 모양의 팁, 스테인리스 스틸 재질,  
 내구성 강함



**Band Seater/  
 Burnisher With Serrated Tip**  
**#844-0001**  
 Positive Control용  
 톱니 모양의 팁

## BAND INSTRUMENT | 밴드 인스트루먼트

INSTRUMENT

| 제조원 HU-FRIEDY(휴프리디) | 판매원 신홍

| 용도 교정용 Band를 낄 때 사용

| 포장 및 구성 1개



**Crown & Band Contouring Plier**  
#678-221  
Stainless Steel Crown과 Band를  
고정시키는 데 사용



**Band Pusher**  
#BP300




**Band Pusher With Short Tip**  
#BP300S




**Band Pusher / Scaler**  
#BPS1



**Band Pusher / Scaler**  
#BPS2

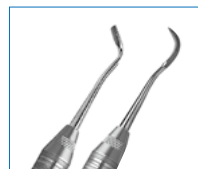

**Scaler Band Pusher**  
#678-904

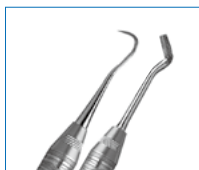

**Band Pusher&Dull Scaler**  
#678-906

## GAUGE | 게이지

INSTRUMENT

| 제조원 ORMCO(옵코) | 판매원 신홍

| 용도 브라켓 위치 Positioning으로 사용

| 포장 및 구성 1개



**Bracket Height Gauges**  
#803-0178 .018"용



**Positive Positioner**  
#800-2222  
작은 Head, 산화 처리된 알루미늄 재질로  
경량, 열소독 불가능



**Bracket Placement Marker/  
Measuring Gauge**  
#801-0000  
Direct 또는 Indirect 브라켓 장착을  
보조하기 위해 사용  
펜슬심이 리필로 들어있음

## PLIER / HAND INSTRUMENT | 플라이어 / 핸드 인스트루먼트

INSTRUMENT

| 제조원 HU-FRIEDY(휴프리디) | 판매원 신홍



**Force Module  
Separating Plier  
#678-210**  
Elastic Separator 장치에 사용



**Tip Back Plier  
#678-216**  
Buccal Tube를 지나서  
돌출된 와이어의 Distal Extension을  
아래로 구부리는 데 사용함

## LINGUAL PLIER | 링궐 플라이어


INSTRUMENT

| 제조원 KNT(케이엔티) | 판매원 신홍

| 용도 설측교정 시에 사용하는 기구




**Utility Pliers  
LP-1**  
가열 멸균 소독(Autoclave) 가능  
규격 : .018" × .025" S.S Wire 이하

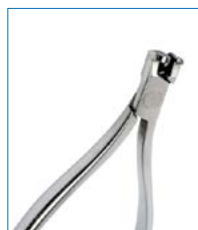

**Distal Flush End Cutter  
LP-3**  
가열 멸균 소독(Autoclave) 가능  
규격 : .018" × .025" S.S Wire 이하



**Pin Cutter  
LP-2**  
가열 멸균 소독(Autoclave) 가능  
규격 : 0.011" Ligature Wire 이하

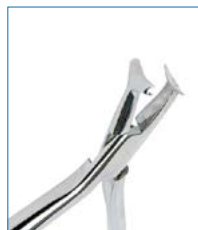

**Cinch Back Pliers  
LP-5**  
가열 멸균 소독(Autoclave) 가능

# CLEAR ALIGNER PLIER | 클리어 얼라이너 플라이어

INSTRUMENT

| 제조원 HU-FRIEDY(휴프리디) | 판매원 신흥

| 용도 교정용 얼라이너 사용 시에 사용

| 포장 및 구성 1개



The Tear Drop  
#678-800




The Vertical  
#678-801



The Horizontal  
#678-802



The Hole Punch  
#678-803

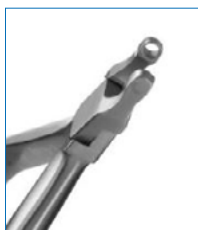

The Spot  
#678-804



The Petite Punch  
#678-805



The Counter Clockwise Wedge  
#678-807



The Clockwise Wedge  
#678-808



The Eraser  
#678-811