

08

인상 | 보철 재료

IMPRESSION PROSTHETIC MATERIALS

임시 치관용 재료	432
임시 충전재	441
의치 이장재	443
웻지, 매트릭스 밴드 및 리테이너	447
인상재류	452
치과용 석고	470
치과용 왁스	471
트레이 레진	471
인상용 트레이	472

KIDS CROWN | 키즈크라운

유치관 | 276945



제산기


| 제조원/판매원 신홍

| 용도 유치용 SS크라운

| 특징


- 전체적인 크라운의 활택도가 높고 Gingival Margin의 폴리싱 작업이 쉬움
- 친환경 투명 세라믹 코팅 처리로 인체에 무해하고 알레르기 유발이 적음
- 빠르고 간편한 커투어링이 가능하며 작업 후 결과도 우수함
- 인체공학적 디자인으로 자연 치아처럼 자연스러운 형태 유지
- 더욱 튼튼한 교합면으로 마모될 염려가 적음

| 사이즈

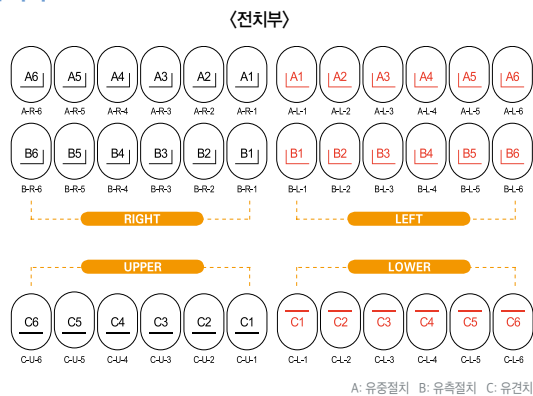


| 포장 및 구성

- 276943 전치부 키트 (36개입, 36종×1개)
- 276944 구치부 키트 (48개입, 48종×1개)
- 276945 구치부 키트 (96개입, 48종×2개)
- 221332~ 구치부 리필 (5개입 / 박스)
- 221650~ 전치부 리필 (5개입 / 박스)
- 278303 전치부 키트 케이스
- 278304 구치부 키트 케이스

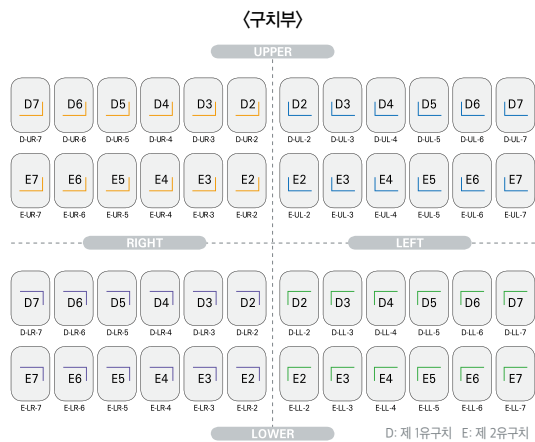

키즈크라운(전치) 실물

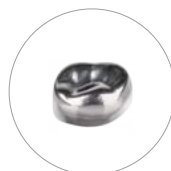

키즈크라운(구치) 실물

KIDS RING CROWN | 키즈 링 크라운

유치관 | 276948



재선기



키즈 링 크라운 실물

| 제조원/판매원 신홍

| 용도 유치용 SS크라운

| 특징

- 기존 키즈크라운에 치실을 묶을 수 있는 링이 달려 있는 유치관
- 유치관에 링을 묶어서 시술하므로, 아이들이 삼키거나 씹는 것을 방지하여 안정성을 높임
- 링은 비틀어서 간단히 제거 가능
- 총 48가지 사이즈 (키즈크라운과 동일한 구성과 사이즈)

| 포장 및 구성

276948 구치부 키트 (96개입, 48종×2개)


271799~ 구치부 리필 (5개입 / 박스)

KIDS GOLDEN CROWN | 키즈 골든 크라운

유치관 | 276947



재선기

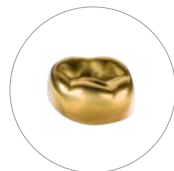

키즈 골든 크라운 실물

| 제조원/판매원 신홍

| 용도 유치용 SS크라운

| 특징

- 기존 키즈 크라운에 티타늄 코팅을 한 골드색 유치관
- 조작이 간편하여 짧은 체어 타임 내에, 골든 크라운 느낌을 재현
- 구강 내에 들어가면 골드 색상이 자연스럽게 치아와 어우러져 이질감이 덜하고, 심미성이 좋음
- 총 48가지 사이즈 (키즈 크라운과 동일한 구성과 사이즈)

| 포장 및 구성

276946 구치부 키트 (48개입, 48종×1개)

276947 구치부 키트 (96개입, 48종×2개)

271664~ 구치부 리필 (5개입 / 박스)

KIDS ZIRCONIA CROWN | 키즈 지르코니아 크라운

유치관 | 274532

| 제조원/판매원 신홍

| 용도 유전치용 지르코니아 크라운

| 특징

- 자연치와 유사한 Shape과 Color로 자연스러운 유전치 심미 수복이 가능
- Autoclave 가능한 시적용 크라운(Try-in Crown)이 존재하여 최종 수복 전까지 사이즈 측정 가능
- 크라운 내면에 특수 처리하여 Cement와의 결합력을 높임
- Cuspid의 경우, Mesial-Distal 길이가 더 짧은 Narrow 타입 존재
- 총 52종 크라운 (상악 : 6가지 사이즈, 하악 : 4가지 사이즈)

| 포장 및 구성

Kit

- 274532 중, 측절치 Kit (24개입, 24종×1개)
- 274533 견치, 견치 Narrow Kit (24개입, 24종×1개)
- 276257 중, 측절치 Try-in Kit (24개입, 24종×1개)
- 276258 견치, 견치 Narrow Try-in Kit (24개입, 24종×1개)

Refill

- 274534~ Zirconia Crown Refill (2개입 / 박스, 수복용)
- 274589~ Zirconia Try-in Crown Refill (1개입 / 박스, 시적용)




Try-in 리필



KIDS ZIRCONIA CROWN


중&측절치 KIT

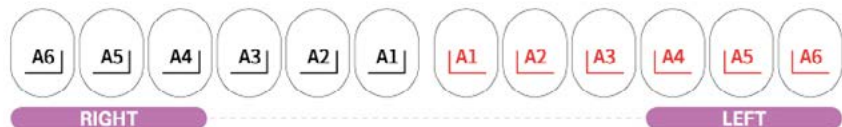

A: 유중절치

B: 유측절치

견치&견치 Narrow KIT

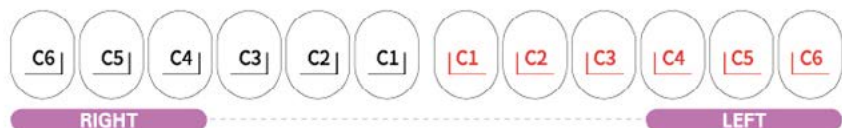

C: 견치

Cn: 견치 Narrow(MD 폭이 좁음)

U: Universal(하악 유전치)



KIDS CLEAR CROWN | 키즈 클리어 크라운

유치관 | 281841

| 제조원/판매원 신홍

| 용도 유전치용 크라운 폼

| 특징

- 투명한 Form 내면에 레진을 채워서 손쉽게 유전치 수복
- 형태 수정이 용이하며, 심미적으로 우수
- 총 16종 크라운 (4가지 사이즈)

| 포장 및 구성

281841 Kids Clear Crown Kit (80개입, 16종×5개)
281842~ Kids Clear Crown Refill (5개입 / 박스)



키즈 클리어 크라운 실물

KIDS CLEAR CROWN

A1 Upper Right *6.0mm	A2 Upper Right *6.7mm	A1 Upper Left *6.0mm	A2 Upper Left *6.7mm
A3 Upper Right *7.4mm	A4 Upper Right *8.1mm	A3 Upper Left *7.4mm	A4 Upper Left *8.1mm
B1 Upper Right *4.3mm	B2 Upper Right *5.1mm	B1 Upper Left *4.3mm	B2 Upper Left *5.1mm
B3 Upper Right *5.9mm	B4 Upper Right *6.7mm	B3 Upper Left *5.9mm	B4 Upper Left *6.7mm

A : 유충철치

B : 유촉철치

SIZE(MD길이) : 1 < 2 < 3 < 4

PERMA CROWN | 퍼마 크라운

영구치관 | 276950

| 제조원/판매원 신홍

| 용도

- 영구치가 나기 시작한 소아 환자부터 성인(고연령)까지 모두 사용 가능한 SS크라운
- 템퍼러리움(임플란트 픽처 식립 후, 임시보철용)
- 엔도 치료 후, 예후가 좋지 않아 일정 기간 상황을 지켜보아야 하는 Case (임플란트의 가능성 염두)
- 저소득층, 장애우 혹은 치료비가 부담되는 경우
- 미성숙 대구치의 법랑 혹은 상아질 이상에서 수복 시(청소년 환자)
- 대구치 수복과 동시 브라켓 웰딩 목적으로 사용(교정 환자)

UPPER

SIZE #7	SIZE #6	SIZE #5	SIZE #4	SIZE #3	SIZE #2	SIZE #2	SIZE #3	SIZE #4	SIZE #5	SIZE #6	SIZE #7
6-UR-7 12.3mm	6-UR-6 11.5mm	6-UR-5 11.0mm	6-UR-4 10.7mm	6-UR-3 10.3mm	6-UR-2 10.0mm	6-UL-2 10.3mm	6-UL-3 10.7mm	6-UL-4 11.0mm	6-UL-5 11.5mm	6-UL-6 11.8mm	6-UL-7 12.3mm

RIGHT LEFT

SIZE #7	SIZE #6	SIZE #5	SIZE #4	SIZE #3	SIZE #2	SIZE #2	SIZE #3	SIZE #4	SIZE #5	SIZE #6	SIZE #7
6-LR-7 12.3mm	6-LR-6 12.5mm	6-LR-5 12.1mm	6-LR-4 11.7mm	6-LR-3 11.3mm	6-LR-2 10.9mm	6-LL-2 10.9mm	6-LL-3 11.3mm	6-LL-4 11.7mm	6-LL-5 12.1mm	6-LL-6 12.5mm	6-LL-7 12.9mm

LOWER

** mm = Mesial-Distal



퍼마 크라운 실물



| 특징

- 사이즈가 다양하여 성인환자의 7번 치아도 사용 가능 (총 6가지 사이즈)
- Kids Crown보다 더 두껍게 제작되어 성인이 사용해도 천공의 우려가 적음
- 총 24가지 사이즈

| 포장 및 구성

- 276949 Perma Crown Half Kit (48개입, 24종×2개)
- 276950 Perma Crown Kit (96개입, 24종×4개)
- 261119~ Perma Crown Refill (5개입 / 박스)

PERMA GOLDEN CROWN | 퍼마 골든 크라운

영구치관 | 276951

| 제조원/판매원 신홍

| 용도


- 영구치가 나기 시작한 소아 환자부터 성인(고연령)까지 모두 사용 가능한 SS크라운

| 특징

- 기존 퍼마 크라운에 티타늄 코팅이 된 영구치용 골드색 SS크라운
- 구강 내에 들어가면 골드 색상이 자연스럽게 치아와 어우러져 이질감이 덜하고, 심미성이 좋음
- Kids Crown보다 더 두껍게 제작되어 성인이 사용해도 천공의 우려가 적음
- 총 24가지 사이즈 (퍼마 크라운과 동일한 구성과 사이즈)

| 포장 및 구성

- 276951 Perma Golden Crown Kit (48개입, 24종×2개)
- 267820~ Perma Golden Crown Refill (5개입 / 박스)

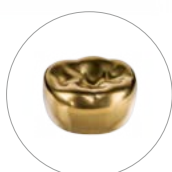

퍼마 골든 크라운 실물

ALU CROWN | 알루 크라운

템포러리 크라운 | 240110

| 제조원/판매원 신흥

| 용도 템포러리 크라운


| 특징

- 이물감, 열발생, 냄새, 수축 걱정없이 편안하게 사용 가능
- 치관 형태로 되어 있어 간단한 시저링만으로 작업 가능
- 간편한 조작으로, 기존 아크릴 레진 대비 체어 타임 단축
- 교합은 환자가 스스로 물면 자동으로 맞출 수 있음
- 소구치, 대구치로 구성
- 총 3가지 사이즈 (1 < 2 < 3)

| 포장 및 구성

240110 Alu Crown Kit (54개입, 18종×3개)

273793~ Alu Crown Refill (5개입 / 박스)

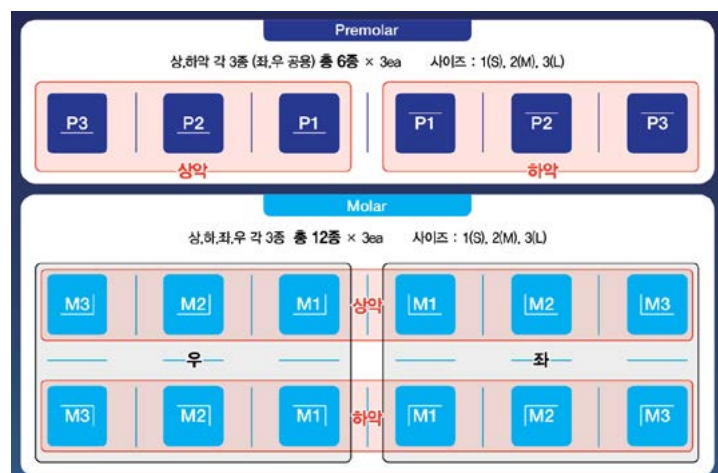

SNAP | 스냅

임시 치관용 레진 | 266116~266120

| 제조원 PARKELL(파켈) | 판매원 신홍

| 용도 영구 수복물 제작 시, 임시로 치아 역할을 하는 레진

| 특징

- Ethyl Methacrylate 성분
- 수축이 적어 정확한 마진 형성 가능
- 뛰어난 색조 안정성
- 낮은 열 발생률

| 포장 및 구성

SNAP Intro Kit

- Resin Powder(40g, 4개), Liquid(118ml), 스포이드(Kit에만 포함)
- 종류 (Resin Powder 구성만 다름)
 - 266119 S803 Snap Intro Kit 1 (62-2개, 65-1개, 69-1개)
 - 266116 S805 Snap Intro Kit 2 (59-1개, 62-2개, 65-1개)
 - 266120 S809 Snap Intro Kit 3 (62-4개)
 - 266117 S813 Snap Intro Kit 4 (62-2개, 65-2개)
 - 266118 S840 Snap Intro Kit 5 (65-4개)
- ※ 각 Kit 당 Liquid - 1개

SNAP Refill

- Resin Powder(40g), Liquid(118ml)
- 색상 : 59(A1/B1), 62(A2), 65(A3), 69(C2/C3)



제산기





| 제조원 GC AMERICA(지씨 어메리카) | 판매원 신홍

| 용도 템포러리 크라운, 브릿지 제작

| 특징

- 템포러리 크라운 & 브릿지
- 작업 시간 1~2분
- 빠른 세팅, 2~3분 내 중합
- 버에 걸리지 않고 쉽게 트리밍, 연마 가능
- 최종 수복물이 준비될 때까지 지대치에 단단하게 유지됨

| 포장 및 구성

Alike Professional Set

- Powder 45g×6개 (#59~#81 색상별 각 1개씩),
- Liquid 4oz(118ml), 스포이드 1개

Alike Refill

- Powder(45g)
- Liquid 4oz(118ml)
- 색상 : #59(B1), #62(A1), #65(A2), #67(A3), #77(B3), #81(A3.5)

| 특이 사항

- 유효 기간 : Powder 2년 / Liquid 1년



TRIM PLUS | 트림 플러스

임시 치관용 레진 | 200256~



| 제조원 KEYSTONE INDUSTRIES(키스톤 인더스트리) | 판매원 신흥

| 용도 | 템포러리 크라운, 브릿지 제작

| 특징

- Tooth Shade Resin으로 임시적인 Crowns, Bridges, Partial, Splints 제작에 사용
- 다양한 셰이드 구성으로 자연스러운 재현이 가능함
- Trim II와 호환 불가 - 딸기향이 나서 조작 시 거부감이 없음

| 포장 및 구성**Trim Plus Kit**

- Liquid(118ml), Powder(42g×6개, A2 및 A3 각 3개씩), Mixing Cup(5개), 스포이드

Trim Plus Refill

- Liquid(118ml), Powder(42g)
- 색상 : 60(A1), 62(A2), 66(A3), 81(A3.5)

PROVINCE | 프로비나이스

임시 치관용 레진 | 166321~



재생키

| 제조원 SHOFU(쇼후) | 판매원 신흥

| 용도 | 템포러리 인레이, 크라운, 브릿지, 어버트먼트 인상용
개인 트레이 제작에 사용**| 특징**

- 조작성과 심미성을 모두 갖춘 자가 중합형 레진
- 뛰어난 내구성과 유지력 - 탁월한 마모 저항성
- 뛰어난 광택과 안정된 컬러로 매우 심미적
- 프랩 후에도 안정된 교합력과 심미성 유지
- Gum Color로 덴처 레진 케이스의 보완, 수리 가능

| 포장 및 구성

- 용량 : Powder 250g, Liquid 250ml
- 색상 : Tooth Color : A1, A2, A3, A3.5, Incisal, 56
Gum Color : U2(Light Pink), U3(Pink), 8S(Gummy Pink)

| 특이 사항 | - 유효 기간 : 3년

LUXATEMP AM PLUS | 럭사템프 오토믹스 플러스

임시 치아 제작용 자가 중합형 레진 | 104110~3, 130553



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 | 임시 크라운 및 브릿지, 라미네이트 제작용 레진

| 특징

- BisAcrylic 레진 성분으로 높은 굴곡 강도를 가짐
- 생체 친화적 - 마모 저항성이 뛰어남

| 포장 및 구성

- 포장 : 76g 카트리지 1개, Mixing Tip 15개
- 색상 : A1, A2, A3.5, B1, Bleach Light

| 연관 상품(별매)

DMG Dispenser (Type 50 10:1)

LUXATEMP SOLAR | 럭사템프 솔라

임시 치아 제작용 광중합형 레진 | 104118



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 | 임시 크라운 및 브릿지, 라미네이트 제작용 레진

| 특징

- Dual Cure로 작업 시간 단축
- Bis-acryl 레진 성분으로 높은 굴곡 강도를 가짐
- 생체 친화적
- 마모 저항성이 뛰어남

| 포장 및 구성

- 포장 : 76g 카트리지 1개, Mixing Tip 15개
- 색상 : A2

| 연관 상품(별매)

DMG Dispenser(Type 50 10:1)

LUXATEMP GLAZE & BOND | 럭사템프 글레이즈 & 본드

임시 치아 제작용 글레이즈 & 본드 | 148295



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 | 임시 크라운 및 브릿지 글레이징 및 리페어

| 특징

- 폴리싱 없이도 우수한 광택 효과
- 리페어 시 우수한 본딩력
- 뛰어난 마모 저항성
- 매끄러운 표면 제공

| 포장 및 구성

- 5ml 보틀 1개, 브러쉬 25

TEMPORARY STOPPING | 템퍼러리 스타핑

기타 임시 충전재 | 103271



| 제조원 SHOFU(쇼후) | 판매원 신흥

| 용도 | 와동의 임시 수복

| 특징

- 양질의 거터퍼처를 배합하여 품질이 좋으며 사용이 쉬움

| 포장 및 구성

- 용량 : 500g

| 특이 사항

- 유효 기간 : 4년

SELECTION-K S TEMP FILL | 셀렉션 에스 템 필

기타 임시 충전재 | 247056~



| 판매원 신홍

| 용도 와동의 임시 수복

| 특징

- 충전, 우식 부위의 실링
- 인레이, 온레이 케이스에 적합
- 편리한 핸들링 : 끈적임이 적음
- Tight Sealing : 낮은 중합 수축률
- 우수한 탄성과 강도 : 유지력 및 한 번에 제거 가능

| 포장 및 구성

- 용량 : 3g x 3개 / 팩
- 색상 : Blue, Yellow

| 특이 사항

- 유효 기간 : 2년

SELECTION-K S TEMP FLOW | 셀렉션 에스 템 플로우

기타 임시 충전재 | 258562~



| 판매원 신홍

| 용도 와동의 임시 수복

| 특징

- 충전, 우식 부위의 실링
- 인레이, 온레이 케이스에 적합
- 흐름성이 없는 고정도 임시 충전재
- 기구가 필요없는 Squeeze 방식
- 우수한 탄성과 제거 용이
- 임플란트(어버트먼트)를 임시 충전으로 탁월

| 포장 및 구성

- 용량 : 2.3g x 4개 / 팩
- 색상 : Blue, Yellow

| 특이 사항

- 유효 기간 : 2년

DENTURE LINER | 덴처 라이너

경질 이장재 | 245645



재선기

| 제조원 SHOFU(쇼후) | 판매원 신홍

| 용도 의치상 수리 및 이장 / 덴처 리베이싱, 릴라이닝 /
부분 덴처 수리

| 특징

- 구강 내 자극이 적고, 냄새도 적음
- 경화제 사용이 편리하고, 변색이나 발열이 거의 없음
- 덴처와의 접착력이 뛰어나
- 형태 수정, 연마가 용이함

| 포장 및 구성

Denture Liner 1-1 Kit

- Powder(80g), Liquid(50ml), Adhesive Agent(16ml),
Hardner(1×50포), Mixing Cup, Brush, Spatula,
Step Card

Denture Liner Refill

- Powder(80g), Liquid(50ml), Adhesive Agent(16ml),
Hardner(50g)

| 특이 사항 - 유효 기간 : 3년



KOOLINER | 쿨라이너

경질 이장재 | 103520



| 제조원 GC AMERICA(지씨 어메리카) | 판매원 신홍

| 용도 의치상 수리 및 이장, 덴처 리베이싱, 릴라이닝, 부분 덴처 수리

| 특징

- Hard Denture Reliner
- 저자극성, 변형 최소화
- 낮은 발열 온도(2mm 두께에서 110도)
- 10분 이내의 경화 시간
- 뛰어난 색조 안정성, 쉬운 폴리싱
- 믹싱 타임 30초, 세팅 타임 10분

| 포장 및 구성

- 용량 : Powder 80g, Liquid 55ml (개별 리필 구매 불가능)
- 색상 : Pink

| 특이 사항

- 유효 기간 3년

COE-SOFT | 코-소프트

연질 이장재 | 103516



| 제조원 GC AMERICA(지씨 어메리카) | 판매원 신홍

| 용도 의치상 수리 및 조정

| 특징

- 자극없는 중합 레진으로 구강 내 조정, 중합되는 리베이스제
- 발열이 거의 없고, 불쾌한 향이나 맛이 없음
- 살균 효과로 덴처를 청결하게 보존시켜 줌
- 믹싱 타임 30초, 세팅 타임 15분

| 포장 및 구성

Coe Soft Prof. Package

- Powder 170g, Liquid 177ml

Coe Soft Refill

- Powder(170g), Liquid(177ml)

- 색상 : Pink

| 특이 사항 - 유효 기간 3년

TISSUE CONDITIONER II SOFT | 티슈 컨디셔너 투 소프트

연질 이장재 | 243808~



제산기

| 제조원 SHOFU(쇼후) | 판매원 신흥

| 용도 의치의 점막 조정, 기능 인상, 임시 이장

| 특징

- 뛰어난 흐름성과 신축성으로 조작이 용이함
- 부드러움이 오래 지속됨
- 발열이 거의 없음

| 포장 및 구성

Tissue Conditioner II Soft Set

- Powder(120g), Liquid(100ml), Mixing Cup, Measures, Spatula, Step Card

Tissue Conditioner II Soft Refill

- Powder(120g), Liquid(100ml)

-색상 : White, Pink

| 특이 사항

- 유효 기간 : 3년



TISSUE CONDITIONER II | 티슈 컨디셔너 투

연질 이장재 | 171254

| 제조원 SHOFU(쇼후) | 판매원 신흥

| 용도 의치의 점막 조정, 기능 인상, 임시 이장

| 특징

- 뛰어난 흐름성과 신축성
- 쉽고 간편한 사용
- 향이 부드럽고 저자극

| 포장 및 구성

Tissue Conditioner II Set

- Powder(120g), Liquid(100ml), Mixing Cup, Measures, Spatula, Step Card

Tissue Conditioner II Refill

- Powder(120g), Liquid(100ml)

-색상 : White, Pink

| 특이 사항

- 유효 기간 : 3년



COE-COMFORT | 코-컴포트

연질 이장재 | 103515



| 제조원 GC AMERICA(지씨 어메리카) | 판매원 신홍

| 용도 의치의 점막 조정, 기능 인상, 임시 이장

| 특징

- 티슈 컨디셔너로 점막 치유 및 개선에 사용
- 점막조직이 안정될 때부터 수회 반복하여 조직이 치유될 때까지 사용
- 최종 기능 인상 시에도 사용
- 믹싱 타임 30초, 구강 내 세팅 타임 4-5분

| 포장 및 구성

- 용량 : Powder 170g, Liquid 177ml (개별 리필 구매 불가능)
- 색상 : White

| 특이 사항

- 유효 기간 3년

MUCOSOFT | 무코소프트

연질 이장재 | 266133

| 제조원 PARKELL(파켈) | 판매원 신홍

| 용도 의치상 수리 및 이장, 소프트 리라이너

| 특징

- 쉽고 빠르며, 열 발생이 적은 Silicone Reline 시스템
- 투명한 핑크 색상으로, 덴처의 기본 색상과 잘 어우러짐
- 소수성을 지니기 때문에 시간이 지나도 수분 흡수 / 변색 / 냄새 / 뻑뻑함이 덜함
- 덴처에 강력하게 접착된 본딩제는 이장재의 벗겨짐, 미세 누출 및 찢김을 방지
- 일반 50ml Auto-Mixing Gun 사용

| 포장

Mucosoft Kit

- Silicone(50ml), Bonding(15ml), 광택제(A-6ml, B-6ml), 믹싱팁, 브러쉬

Mucosoft Refill

- Silicone(50ml), Bonding(15ml)



DENTUSIL | 덴처실

연질 이장재 | 149843



| 제조원 KEYSTONE INDUSTRIES(키스톤 인터스트리)

| 판매원 신홍

| 용도 실리콘 타입의 소프트 리라이너

| 특징

- Dentusil은 자동 믹스 시스템인 소프트 리라인 재료로, 장기간 사용 가능
- PMMA(폴리메틸) 의치 레진에 적합
- 신속하고 청결한 리라인을 단 한 번에 완료
- 작업 시간 약 1분, 경화 시간 약 5분 30초, 구강 내 경화 약 4분 30초

| 포장 및 구성

Dentusil Standard Kit

- Silicone(50ml), Bonding(10ml), 분리제(10ml)

GLAZE | 글레이즈

폴리싱 | 146139



| 제조원 KEYSTONE INDUSTRIES(키스톤 인터스트리)

| 판매원 신홍

| 용도 셀프 큐어 레진 폴리싱

| 특징

- 의치, 크라운, 리라이닝, 템포러리의 글레이징 마무리, 폴리싱 대신에 사용
- 실내 온도 21℃ 이하에서 보관

| 포장

- 글레이즈 12ml
- 용해액 12ml

TRUREPAIR | 트루리페어

경질 이장재 | 146146



| 제조원 KEYSTONE INDUSTRIES(키스톤 인터스트리)

| 판매원 신홍

| 용도 경질 리라이너용

| 특징

- 안정적인 색상의 접착 수선 재료
- 염색된 Powder는 모든 치과 의치 재료와 잘 혼합됨

| 포장 및 구성

Trurepair Kits

- Powder(170g), Liquid(236ml), Liquid Dispenser
- 색상 : Pink

MATRIX BAND | 매트릭스 밴드

매트릭스 밴드 | 275243~5



| 제조원 TRIBEST(트리베스트) | 판매원 신홍, 디브이홀딩스

| 용도 수복용 매트릭스 밴드

| 특징

- 다양한 사이즈 및 타입으로 필요에 맞게 사용 가능
- 토폴마이어 매트릭스 리테이너에 사용
- 스테인리스 스틸 재질

| 포장 및 구성

- 단위 : 12개 × 10팩
- 종류 : 275243 #1 두께 0.0015 (위에서부터 1번째)
275244 #2 두께 0.0015 (위에서부터 2번째)
275245 #1 두께 0.002 (위에서부터 3번째)

MATRIX BAND | 매트릭스 밴드

매트릭스 밴드 | 102844



| 제조원 WATERPIK(워터픽) | 판매원 신홍

| 용도 수복용 매트릭스 밴드

| 특징

- 토폴마이어 매트릭스 리테이너에 사용
- 스테인리스 스틸 재질

| 포장 및 구성

- 용량 : 36개 / 팩
- 사이즈 : 0.038mm

MATRIX RETAINER | 매트릭스 리테이너

매트릭스 리테이너 | 102847



| 제조원 WATERPIK(워터픽) | 판매원 신홍

| 용도 매트릭스 고정, 유지용

| 특징

- 매트릭스를 정확하게 장착이 가능함

| 포장 및 구성

- 용량 : 1개 / 팩

HAWE SUPERMAT SYSTEM | 하웨 슈퍼매트 시스템

마이크로수복용 | 143726



| 제조원 KERRHAWE(커하웨) | 판매원 신흥

| 용도 대구치 및 소구치용 매트릭스 밴드

| 특징

- 대구치, 소구치용으로 스틸과 투명 플라스틱 2종류
- 통계 자료에 근거해 계산된 밴드 크기와 모양
- Super Lock Tensioning Instrument로 Ring Tension을 만들어 트림
- 일상 케이스 뿐 아니라 매우 깊거나 확대된 와동과 같은 이례적인 케이스에 특수한 형태의 매트릭스를 사용 가능

| 포장

Hawe SuperMat Assortment

- Super Lock Tensioning Instrument 1개, Adapt Super Cap Matrix(스틸) 14개, Adapt Super Cap Matrix(투명 플라스틱) 6개 (Super Cap Steel / Transparent 리필 가능)

HAWE LUCIFIX | 하웨 루시픽스

매크로수복용 분할매트릭스 시스템 | 135247~9



| 제조원 KERRHAWE(커하웨) | 판매원 신흥

| 용도 구치부용 매트릭스 밴드

| 특징

- 투명한 구치부용 매트릭스 밴드로 고정 장치가 추가된 완전한 시스템
- 광중합형 컴포지트와 레진 인레이에 사용하는 이상적인 매트릭스 시스템
- 매트릭스 홀더와 같은 특별 기구 없이도 타이트하게 맞출 수 있음
- 에칭 젤, 본딩, 프라이머와 접촉해도 변색이 되지 않는 밴드
- 기존 매트릭스 홀더 없이도 조정이 가능함

| 포장 및 구성

Hawe Lucifix / Adapt Luciwedge Matrix System

- Lucifix 소구치용 밴드 30개, Lucifix 대구치용 밴드 15개, Adapt Luciwedges(Ultra-Small, Small, Medium, Large 각 15개씩) 60개

Refill : Hawe Lucifix(소구치용 밴드) 50개

Hawe Lucifix(대구치용 밴드) 50개

HAWE TRANSPARENT CERVICAL FOILS | 하웨 트랜스패런트 서비칼 포일

서비칼용 레진 스트립 | 126929~34



| 제조원 KERRHAWE(커하웨) | 판매원 신흥

| 용도 서비칼용 매트릭스 밴드

| 특징

- 필링을 만들기 전에 별도의 조작이 필요 없음
- Edge 부분이 얇아서 잉여 컴포지트 레진 없이, 정확한 치아 재건이 가능
- 충전 시 심미성 향상에 도움
- 레진에 달라붙지 않음

| 포장 및 구성

Transparent Cervical Foils Soft Ass.

- 851S-855S 각 35개 / 856S-857S 각 50개
- Gingival Retractor 1개 / Holding Instrument 1개

HAWE STRIPROLL | 하웨 스트립롤

레진 스트립 | 126916~8



| 제조원 KERRHAWE(커하웨) | 판매원 신홍

| 용도 레진 스트립

| 특징

- 투명한 폴리에스테르 스트립으로 전치부 충전 시 사용
- 스카치 테이프처럼 용기에서 직접 스트립을 잘라 사용
- 두께는 모두 0.05mm, 총 길이 15m

| 포장 및 구성

- 종류 : 6mm / 8mm / 10mm

HAWE STOPSTRIP | 하웨 스톱스트립

투명한 전치부용 매트릭스 밴드 | 126910~5



| 제조원 KERRHAWE(커하웨) | 판매원 신홍

| 용도 레진 스트립

| 특징

- 적절한 치간부로 통과시켜 고정
- 투명한 매트릭스로 광중합 시 방해 되지 않음
- 두께 0.05mm

| 포장

	No.	모양	폭(너비)	포장
Assort	126910	Straight	8mm / 10mm	75 × 2
	126913	Curved	8mm / 10mm	75 × 2
Refill	126911	Straight	8mm	100
	126912	Straight	10mm	100
	126914	Curved	8mm	100
	126915	Curved	10mm	100

HAWE SYCAMORE INTERDENTAL WEDGES | 하웨 시커모아 인터덴탈 웬지

우드 웬지 | 126919~28



Wedges Orange

822/10



Wedges Dispenser

826

| 제조원 KERRHAWE(커하웨) | 판매원 신홍

| 용도 치간, 인접치, 잇몸 보호용 웬지

| 포장

126927 Interdenal Wedge Dispenser

- Wedge Dispenser, Assorted, Pack of 500

- 색상

Turquoise(Mini), Orange, White, Green, Yellow, Blue, Red, White

Turquoise, Mini	126919	
Orange	126920	
White Mini	126921	
Green	126922	
Yellow	126923	
Blue	126924	
Red	126925	
White	126926	

HAWE ADAPT LUCIWEDGES | 하웨 어댑트 루시웬지

웬지 | 135250~53



| 제조원 KERRHAWE(커하웨) | 판매원 신홍

| 용도 치간, 인접치, 잇몸 보호용 웬지

| 특징

- 컴포지트의 프록시말 라이트 큐어링에 이상적

| 포장 및 구성

135250 Adapt Luciwedges Assortment

- Ultra Small, Small, Medium 각 40개, Large 30개 (총 150개 / 팩)
- Adapt Luciwedges Refill (100개 / 팩)
- 135251 Luciwedges Small Refill
- 135252 Luciwedges Medium Refill
- 135253 Luciwedges Large Refill

WIZARD WEDGES | 위저드 웬지

우든 웬지 | 103354~5



| 제조원 WATERPIK(워터픽) | 판매원 신홍

| 용도 치간 이격, 인접 치아, 잇몸 보호용

| 특징

- 치경부 커브에 잘 맞는 해부학적 형태로 치아에 확실히 고정

| 포장 및 구성

Wizard Wedge Wooden (400개) / 팩

- S(Natural), M(Yellow), L(Purple), XL(Red) 각 100개

Wizard Wedge Wooden (500개) / 팩

- S, M, L, XL 각 125개(단색)

(BARMAN) WEDGE 200'S | (바만) 덴토라마 웬지

우든 웬지 | 197696, 197973~4



| 제조원 SVENSKA DENTORAMA AB(스벤스카)

| 판매원 신홍

| 포장 및 구성

- 용량 : 200개 / 팩

197696 Wedge Aux-090 S/Ivory (200개)

197973 Wedge Aux-095 L/Green (200개)

197974 Wedge Aux-100 ASS/Mixed (200개)

- 사이즈

Small (Ivory, #AUX-090)

Large (Green, #AUX-095)

Mixed (Ivory / Green, #AUX-100)

FENDERMATE | 펜더메이트

매트릭스 | 266035



| 제조원 DIRECTA(다이렉타) | 판매원 신홍

| 용도 Class II 컴포지트 수복

| 특징

- 매트릭스+웬지 일체형의 해부학적 디자인
- 컨택 부위를 예상할 수 있도록, 매트릭스 부분에 Pre-Contouring이 되어 있음
- 치경부 과잉 충전을 막음
- 진한색이 보통 굵기, 연한색이 얇은 굵기
- Lingual, Buccal 방향, 굵기에 따라 총 4가지 종류

| 포장

FenderMate Assortment Kit (72개)

- Left Regular/Green(18개), Left Narrow/Light-Green(18개), Right Regular/Blue(18개), Right Narrow/Light-Blue(18개)

FenderMate Refill

- Left Regular(18개), Left Narrow(18개), Right Regular(18개), Right Narrow(18개)

FENDERWEDGE | 펜더웬지

웬지 | 266024



| 제조원 DIRECTA(다이렉타) | 판매원 신홍

| 용도 프랩 시, 인접 치아와 잇몸을 보호하는 역할

| 특징

- Class II 프랩 시, 인접치 및 잇몸의 손상 최소화
- 자신감 있는 프랩 시술 가능
- 웬지 굵기에 따라 총 4가지 종류

| 포장

FenderWedge Assortment Kit (144개)


- X-Small/Lilac(36개), Small/Orange(36개), Medium/Green(36개), Large/Yellow(36개)

FenderWedge Refill

- X-Small(36개), Small(36개), Medium(36개), Large(36개)

FENDER MATE PRIME | 펜더 메이트 프라이م

매트릭스 | 266046

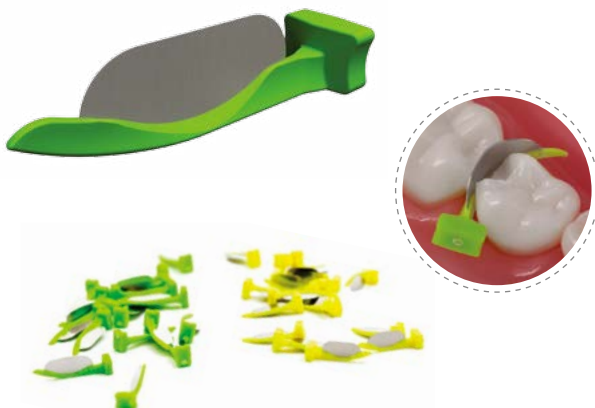

| 제조원 DIRECTA(다이렉타) | 판매원 신홍

| 용도 소아 환자용 / 인접치 보호 및 Class II 컴포지트 수복

| 특징

- 유치 프랩 시, 인접치를 보호하는 역할과 Class II 수복 모두 가능함
- 보트 모양의 팁으로 손상 최소화 - 길이에 따른 2가지 종류
- Neon-Green : 길고, 잘 구부러지기 때문에 수복 시, 용이함
- Neon-Yellow : 짧고, 더 단단하기 때문에 타이트한 인접면에 사용

| 포장

Fender Mate Prime Assortment Kit (36개)

- Long/Neon-Green(18개), Short/Neon-Yellow(18개)

Fender Mate Prime Refill

- Long (18개), Short(18개)

SELECTION-K VPS | 셀렉션-케이 브이.피.에스

러버 인상재 | 227747~227752



| 판매원 신홍

| 용도 구강 내 전체 혹은 개별 치아의 인상 채득

| 특징

- 선명하고 진한 보색 대비로 연합 인상을 할 때에도 정확하고 빠른 마진 리딩 가능
- 흐름도가 가장 좋은 X-Light를 이용하여 언더컷까지 정확한 인상 가능
- 탄성회복력(99.4% 이상)과 낮은 압축변형율로 변형없이 안전하게 인상 보호
- 기포 발생을 최소화하고, 친수성을 극대화하여 구강 내 수분으로 생기는 비정확성을 최소화
- 나노실리카 입자를 극대화하여 먹성이 유연하고 부드럽게 됨

| 포장

디스펜싱타입	점도	포장
건	Heavy / Regular / Light / X-Light	50ml×6개 / 팩
튜브	Heavy	베이스 50ml×1개, 카탈리스트 150ml×1개 / 팩
퍼티	Putty	베이스 450g×1개, 카탈리스트 450g×1개 / 팩

| 물성

Technical Data

시험 항목	Light / X-Light	Regular	Heavy	Putty
조직 여유 시간	2'30"	2'15"	2'15"	2'00"
구강 내 유지 시간	≤4'00"	≤4'00"	≤4'00"	≤4'00"
탄성 회복율(%)	≥99	≥99	≥99	≥99
압축 변형율(%)	≤9.0	≤5.0	≤3.0	≤3.0
선체적 변화(%)	≤0.2	≤0.2	≤0.2	≤0.2

| 특이 사항 - 유효 기간 : 2년

SELECTION-K VPS PREMIUM LIGHT | 셀렉션-케이 프리미엄 라이트

러버 인상재 | 260326



| 판매원 신홍

| 용도 구강 내 전체 혹은 개별 치아의 인상 채득

| 특징

- Crown, Inlay, Onlay, Bridge의 정밀 인상 채득
- Implant용 인상 채득 및 정밀한 교환 체크
- 이상적인 Flow 발현 및 미세 부위 재현성 실현
- 최대 찢김 강도 실현
- 친수성 갖고 있음, 진공 배합 생산으로 기포 없음

| 포장 및 구성

- 용량 : 50ml×4개 / 팩

| 특이 사항

- 유효 기간 : 2년
- 작업 시간(23℃) : 1분 30초
- 구강 내 경화 시간(32℃) : 3분 30초

EXTRUDE | 엑스트루드

폴리비닐실록산 인상재 | 103745~66



재선기

| 제조원 KERR(커) | 판매원 신홍

| 용도 VPS 인상재

| 특징

- 습윤성 인상재료 친수성 표면을 갖고 있어 기포 생성 방지
- 우수한 탄성 회복력, 찢김 강도
- 구강 내 제거 용이, 세부면의 뛰어난 재현
- 석고를 붓기 전에 1~2시간 기다릴 필요없이 석고 주입
대기 시간은 20분이며 체적 안정성이 매우 높음

| 인상법

- One Step : Extrude Putty / Wash 또는 Medium
- Two Step : Extrude Putty / Wash 또는 Medium
- Double Mix : Extrude Extra / Wash 또는 Medium



| 포장 및 구성

제품명	점도	조작 시간 (작업 시간 포함)	구강 내 경화 시간	타입	구성
Extrude Wash	저점도	2분	4분	카트리지	500ml × 2Cart, 믹싱팁 6개
Extrude Medium	중점도	2분	4분	카트리지	
Extrude Extra	고점도	2분	4분	카트리지	
Extrude XP(Extra Putty)	고점도 Very Heavy	2분	4분	Jar	베이스 1개(260ml), 카탈리스트 1개(260ml)

SELECTION VPS MIXING GUN | 셀렉션 바이피에스 믹싱 건

디스펜싱 건 | 242674

| 판매원 신홍

| 용도 디스펜싱 건

| 특징

- 50ml 1 : 1 / 2 : 1 모두 호환
- 정밀하게 토출 가능
- 사용감이 부드러워 손의 피로가 덜함



MIXING TIP | 믹싱 팁

믹싱 팁 | 274855~



| 판매원 신홍, 디브이홀딩스

| 용도 인상재 믹싱 팁

| 특징

- PB상품으로 좋은 품질과 합리적인 가격

| 포장 및 구성

- Green / Heave : 48개 / 팩, 200개 / 팩

- Yellow / Light (오랄팁 포함) : 48개 / 팩, 300개 / 팩



275287 오랄팁 100개 / 팩



ADHESIVE VPS 1/2 OZ

어드히시브 바이피에스 1/2 온스

VPS 어드히시브 | 103770



| 제조원 KERR(커) | 판매원 신홍

| 용도 VPS용 트레이 접착제

| 특징

- 트레이로부터 인상재가 분리되는 것을 예방
- 커버에 부착되어 있는 브러쉬
- 도포 용이

| 포장 및 구성

- 용량 : 15ml / 병

TRAY ADHESIVE

트레이 어드히시브

인상용 어드히시브 | 272009



| 제조원 DENTAL TECHNOLOGIES(덴탈 테크놀로지스)

| 판매원 신홍, 디브이홀딩스

| 용도 트레이와 인상재간 접착력을 높여줌

| 특징

- 푸른색 점액
- 뚜껑에 부착된 브러쉬로 트레이 내부에 얇게 도포하여 건조시킨 후, 트레이에 인상재를 넣어 인상을 뜬다.

| 포장 및 구성

- 단위 : 2개 / 팩
- 용량 : 14ml

| 주의 사항

알지네이트 전용 (VPS로 사용할 수 없음)

HONIGUM AM LIGHT | 허니검 오토믹스 라이트

VPS 인상재 | 149018



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 인상 채득

| 특징


- 우수한 친수성
- 매우 높은 요변성
- 상악 Injection 시 안정적인 점도를 지녀 구강 내로 흐르지 않음
- 인상 채득 단계에서는 높은 흐름성으로 매우 우수한 마진 부위 세부 재현

| 포장 및 구성

- Economy 패키지 : 50ml 카트리지 8개 (팁 미포함)

상악에서 흘러내리지 않는 라이트바디!
인상 채득 시 매우 우수한 흐름성!

디스펜서 조작 시 느껴지는 부드러움과
미세 부위 마진 재현성을 직접 경험해보세요.

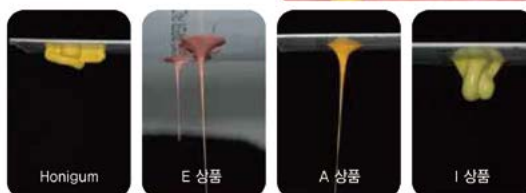

〈조선대 김희중 교수, 덴포라인 2007년 12월호 발행〉



▶ 흘러내리지 않는 인상재

HONIGUM AM MONO

허니검 오토믹스 모노

VPS 인상재 | 166351



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 인상 채득

| 특징

- 원스텝으로 정확한 인상 채득
- 정확한 세부 마진 재현
- 프렙한 곳에서도 정확한 인상 채득
- 매우 높은 크기 안정성
- 우수한 친수성

| 포장 및 구성

- Economy Pack : 50ml 카트리지 8개 (팁 미포함)

HONIGUM AM HEAVY

허니검 오토믹스 헤비

VPS 인상재 | 166352



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 인상 채득

| 특징

- 높은 강도로(퍼티와 유사) Pick-Up 인상 채득에 최적
- 균일한 믹싱으로 기포 발생이 없음
- 매우 우수한 크기 안정성
- 쉽고 안전한 제거

| 포장 및 구성

- Economy Pack : 50ml 카트리지 8개 (팁 미포함)

TRAY ADHESIVE

트레이 어드헤시브

트레이 어드헤시브 | 104088



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 VPS 인상재용 트레이 어드헤시브

| 특징

- 트레이로부터 인상재가 분리되는 것을 예방
- Cap에 브러시가 부착되어 있어 도포 시 용이
- 파란색 : 최적의 색깔 대비
- 도포 후 짧은 세팅 타임

| 포장 10ml 1개

MIXSTAR eMOTION

믹스타 이모션

VPS 인상재 자동 혼합 기계 | 181752



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 VPS 인상재 자동 혼합

| 특징

- 기포가 없는 균일한 혼합
- 자동 혼합으로 편리한 조작
- 다양한 재료 구성 및 손쉬운 청소
- 워킹 타임과 세팅 타임을 알려주는 타이머 탑재

| 사용 가능한 카트리지 종류

Honigum MS Mono, Honigum MS Heavy, Silagum MS Putty, Status Blue

HONIGUM MIXSTAR MONO

허니검 믹스타 모노

VPS 인상재 | 104073



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 인상 채득

| 특징

- 원스텝으로 정확한 인상 채득
- 프렙한 곳에서도 정확한 인상 채득
- 매우 높은 크기 안정성
- 우수한 친수성
- 정확한 세부 마진 재현
- 워킹 타임 2분 / 구강 내 세팅 타임 3분 15초

| 포장 및 구성

- 380ml 카트리지 5개
- Mixstar Tip 50개

HONIGUM MIXSTAR HEAVY

허니검 믹스타 헤비

VPS 인상재 | 134390



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 인상 채득

| 특징

- 높은 강도로(퍼티와 유사) Pick-Up 인상 채득에 최적
- 균일한 믹싱으로 기포 발생이 없음
- 매우 우수한 크기 안정성
- 쉽고 안전한 제거
- 워킹 타임 2분 15초 / 구강 내 세팅 타임 3분 15초

| 포장 및 구성

- 380ml 카트리지 5개
- Mixstar Tip 50개

STATUSBLUE MIXSTAR

스타터스 블루 믹스타

VPS 인상재 | 150537



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 인상 채득

| 특징

- 알지네이트의 장점을 갖춘 VPS 인상재
- 대합치, 템포러리 인상에 최적
- 자동혼합으로 간편한 혼합
- 워킹 타임 1분 15초, 구강 내 세팅 타임 1분 45초
- 수축이 거의 없음
- 변형 후 뛰어난 회복

| 포장 및 구성

- 380ml 카트리지 5개
- Mixstar Tip 50개

SILAGUM PUTTY SOFT

실라검 퍼티 소프트

VPS 인상재 | 127582, 135406



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 인상 채득

| 특징

- 쉬운 조작성
- 우수한 변형 후 회복력
- 구강 내 제거 용이
- 실라검 라이트와 함께 Two 스텝 인상에 탁월

| 포장 및 구성

- 믹스타 타입 380ml 카트리지 5개 / Mixstar Tip 50개
- 핸드믹스 타입 : Base(262ml) 8개 / Catalyst(262ml) 8개

SILAGUM AM LIGHT

실라검 오토믹스 라이트

VPS 인상재 | 149080



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 인상 채득

| 특징

- 크라운 & 브릿지 인상
- 인레이 & 온레이 인상
- 우수한 친수성
- 흐름성 있는 점도

| 포장 및 구성

- 50ml 카트리지 8개 (팁 미포함)

SILAGUM HM LIGHT

실라검 핸드믹스 라이트

VPS 인상재 | 141222



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 인상 채득

| 특징

- 크라운 & 브릿지 인상
- 인레이 & 온레이 인상
- 우수한 친수성
- 흐름성 있는 점도

| 포장 및 구성

- Base(90ml) 8개
- Catalyst(90ml) 8개

BLU-MOUSSE | 블루무스

실리콘 인상재 | 266129~266132

| 제조원 PARKELL(파켈) | 판매원 신홍

| 용도 | 치아 교합면 및 치아 모형을 기록할 때 사용하는 실리콘 교환 인상재

| 특징


- Vinyl Polysiloxane 성분으로 만들어진 Bite 체크용 인상재
- 뛰어난 정확도
- 플라스틱(석고)와 비슷한 강도 (90-durometer)
- 변형 없는 모양 유지
- 하늘색, 무취, 무미
- 경화 시간 30초, 60초, 2분으로 다양한 시술 가능

| 포장 및 구성

- 용량 : Cartridge 타입 - 50ml (믹싱팁 10개 포함)
- Tube 타입 - Base(80ml), Catalyst(80ml)

- 종류

Type 종류	작업 시간 : 구강 내 세팅 타임
Blu-Mousse Super-Fast	30초
Blu-Mousse 60	60초
Blu-Mousse Classic	2분
Blu-Mousse Classic (Tubes)	2분

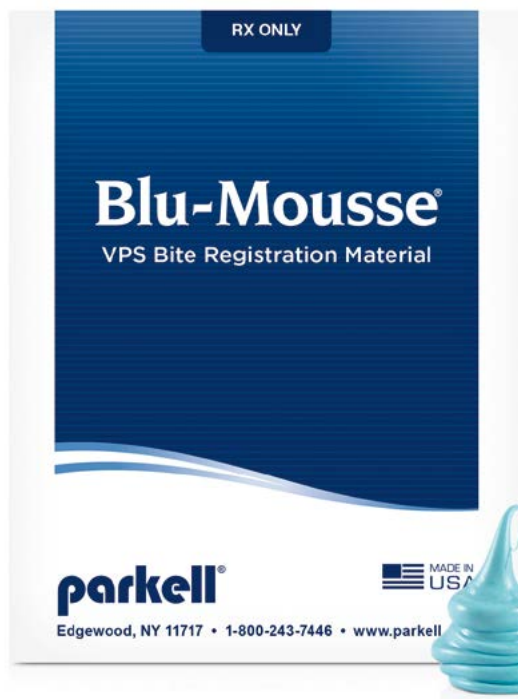

SELECTION-K VPS BITE | 셀렉션-케이 브이피에스 바이트

실리콘 인상재 | 247058



| 판매원 신홍

| 용도 치과용 교합 인상재

| 특징

- 빠르고 정확한 교합 채득 - 30초 이내
- 뛰어난 강도와 트리밍 (Shore-A Hardness : 91)
- 흘러내리지 않는 편리한 핸들링
- 전혀 생기지 않는 기포

| 포장 및 구성

- 용량 : 50ml × 4개 / 팩

O-BITE | 오바이트

실리콘 교합 인상재 | 149752, 207670



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 교합 채득

| 특징

- 매우 높은 Final Hardness(93.3Mpa)
- 가장 높은 Hardness를 가진 VPS 재료의 교합 인기재
- Occlusal의 미세 부위 재현
- 충분한 세팅 타임으로 한 번에 Full Arch 바이트 체크

| 포장 및 구성

- 2팩 : 50ml 카트리지 2개, Mixing Tip 12개
- Economy팩 : 50ml 카트리지 8개 (팁 미포함)

| 작업 시간 구강 내 세팅 타임 1분 30초

| 사용 팁 10분 이내 작업 시 스칼펠로 부드럽게 Trimming 가능

LUXABITE | 럭사바이트

교합 인상재 | 177606



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 교합 채득

| 특징

- Bis Acrylate 재료의 교합 인기재
- 도포시 흘러내리거나 변형이 없음
- 우수한 크기 안정성

| 작업 시간

- 워킹 타임 (45초) / 구강 내 세팅 타임 (2분~2분 30초)

| 포장 및 구성

- 50ml 카트리지 1개 / Mixing Tip 15개

LUXAFORM | 럭사폼

템포러리 인상재 | 104107



| 제조원 DMG(디엠지) | 판매원 신성치과기재

| 용도 템포러리 인상 채득

| 특징

- 열가소성 폴리머 인상재
- 템포러리 인상에 적합
- Luxatemp와 함께 사용 시 Bis-Acrylic 레진의 산소 방해층 생성의 우려가 없음
- 긴 유효 기간
- 무취

| 포장 및 구성 72개

LUMINOUS GINGIVA CLEAR GEL BASIC | 루미너스 진지바 클리어 겔 베이직

인상 전 처치재 | 243717



| 제조원 해림덴텍 | 판매원 신흥

| 용도 빠른 지혈 작용을 위한 인상 전 처치재로 사용

| 특징

- 치은 수축 및 지혈 효과가 뛰어난 겔타입 제품
- 30초~1분 이내의 지혈 작용으로 빠르고 효과적인 Retraction이 가능함

- 응고성 플로그(혈전) 및 검은 얼룩 등이 발생하지 않음
- 구치부는 물론 전치부에도 사용이 가능함
- 시린지 겔 타입으로 사용이 간편함

| 포장 및 구성

- 용량 : 3g Syringe × 5개, 팁, 시린지그립 / 박스

| 사용방법



Tip을 장착한 후 Tip이 치아의 측면과 평행이 되도록 합니다. 본 제품의 적정량(적당한 양)을 시술을 시행할 부위에 적용을 합니다.



코드를 사용할 경우 코드를 치은 열구에 삽입한 후 본 제품의 적정량을 시술을 시행할 부위에 적용합니다.



본 제품의 적용 후 30초~1분간 기다리면 치은 수축 및 지혈 작용이 완료됩니다.



시술을 마친 후에는 간단히 물로 수세를 합니다. 사용 후 뚜껑을 막아서 건조하고 서늘한 곳에 보관을 합니다.

LUMINOUS GINGIVA CLEAR GEL H.V | 루미너스 진지바 클리어 겔 에이치브이

인상 전 처치재 | 267778



| 제조원 해림덴텍 | 판매원 신흥

| 용도 빠른 지혈 작용을 위한 인상 전 처치재로 사용

| 특징

- 베이직(일반형)보다 20% 향상된 성능 효과
- 출혈양이 많거나 빠른 지혈, 확실한 지혈이 필요한 케이스에 사용
- 정밀 인상 채득이 가능하며 고정도로 구성된 제품
- 30초~1분 이내의 지혈 작용으로 빠르고 효과적인 Retraction이 가능함

- 응고성 플로그(혈전) 및 검은 얼룩 등이 발생하지 않음
- 구치부는 물론 전치부에도 사용이 가능함
- 시린지 겔 타입으로 사용이 간편함
- 2단계 지혈 방식(물리적 지혈 & 화학적 지혈)

| 포장 및 구성

- 용량 : 1.2g Syringe × 4개, 팁 / 박스

DRYZ | 드라이지

인상 전 처치제 | 266137



재선기

| 제조원 PARKELL(파켈) | 판매원 신홍

| 용도 인상 채득 및 처치제

| 특징

- 수복물 세팅, 러버댐 클램프 장착, 치은 연하 충치 치료 등에 효과적
- 빠른 작업 시간
- 구별하기 쉬운 연두 색상
- 시린지별 개별 포장되어 위생적이고, 관리가 쉬움
- 황산제2철(Ferric sulfate) 성분이 없어 사용 후에도 검은 얼룩 등을 남기지 않음
- 심장 질환 환자에게 위험한 에피네프린(epinephrine)이 들어있지 않음



| 포장 및 구성

- 용량 : 0.5ml×7개, Applicator tip 15개 / 팩



RE 'CORD | 리코드

바이트 체크용 재료 | 178672

| 제조원 KEYSTONE INDUSTRIES(키스톤 인더스트리) | 판매원 신홍

| 용도 바이트 인상재

| 특징

- 냄새나 맛이 없고 Setting이 빠르며 1분 내에 Snap-Set이 균도록 되어 있음
- 푸른색 Cartridges로 다른 Gun과 호환이 가능

| 포장

- Standard Kit (0921315)
- Cartridge 50ml×2개/박스, Mixing Tips 10개



SELECTION-K GINGICORD | 셀렉션-케이 진지코드

인상용 진지코드 | 234452~56

| 판매원 신홍

| 용도 인상 전 처치재

| 특징

- 100% 순면으로 짜여진 Knitted 타입의 인상 전 처치재
- 특수 꼬임으로 유연성과 탄력성을 더함

| 포장 및 구성

- 용량 : 254cm(100inch) / 팩
- 사이즈 : Gingicord 2 : 1.35mm, 녹색 / 연녹색
Gingicord 1 : 1.20mm, 파란색 / 연파란색
Gingicord 0 : 0.99mm, 보라색 / 연보라색
Gingicord 00 : 0.82mm, 갈색 / 노란색
Gingicord 000 : 0.70mm, 검정색 / 회색

| 특이 사항

- 영구적인 치은의 퇴축을 피하기 위하여 치은 열구 이내에 20분 이상 코드를 사용하지 않는다.
- 직사광선을 피하고 건조한 곳에 보관



RE - CORD | 리코드

진지코드 | 191590~

| 제조원 WILLMANN & PEIN(윌만 & 페인) | 판매원 신홍

| 용도 인상 처치재

| 특징

- 순면 100%의 Knitted Retraction Cord
- 수천개의 작은 실 고리가 서로 얹혀 만들어진 Non-Impregnate Retraction Cord
- 원통 모양으로 만들어져 삽입이 용이하고 흡수성이 뛰어남
- 동일한 두께로 삽입되어 최적의 압착을 가할 수 있음
- 총 길이가 300cm로 매우 경제적

| 포장 및 구성

- 용량 : 1개 / 팩
- 사이즈 : 300cm
- 종류 : 191590 Re-Cord 0 Purple-White
191589 Re-Cord 00 Black-Yellow
214483 Re-Cord 000 Black
191592 Re-Cord 1 Blue-White
191593 Re-Cord 2 Green-White



SELECTION-J ALGINATE | 셀렉션 제이 알지네이트

알지네이트 인상재 | 219991



| 제조원 YOUDENT(유덴트) | 판매원 신홍

| 용도 | 대합치의 인상 채득

| 특징

- 고운 입자로 기포 및 얼룩이 생길 염려가 없으며 부드러운 연화감으로 믹싱이 부드러워 사용이 더욱 편리
- 탄성이 좋아 쉽게 찢기지 않으며 미세 부위까지 정밀하게 재현 가능
- 인상 채득 후 형태 변형 걱정 없이 균일한 석고 표면을 얻을 수 있음
- 빠른 경화 속도(1분 55초)로 신속한 작업이 가능하며, 분말이 날리지 않는 Dust Free 타입
- 어린 아이들도 거부감없는 부드럽고 상쾌한 스톱베리민트향

| 포장 및 구성

- 용량 : 1kg
- 색상 : Pink

Selection-J Alginat Normal Pink 1Box


- 1kg×5개, 계량컵(1개), 스푼(1개)



| 특이 사항

- 유효 기간 : 3년

| 온도 변화에 따른 경화 개시 시간

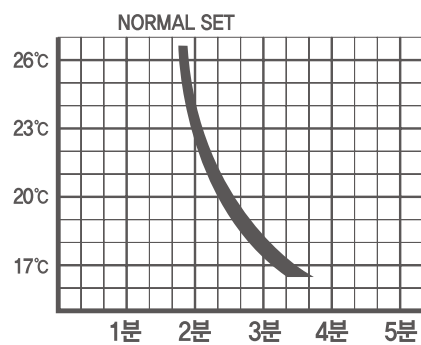

| 관련 상품

- 221470 Selection Alginat Case

NEW ALGISTAR⁺ | 뉴 알지스타플러스

알지네이트 인상재 | 240703



☺ 인상 채득 후 형태 변형 사진(수축률)

SSS New Algistar⁺

A사



B사

※ 동일한 조건 하(폴리에틸렌 봉투에 밀폐)에서 5일간 보관 후 수축 현상 관찰

| 제조원 SSS(산에스) | 판매원 신성치과기재

| 용도 인상 채득

| 특징

- 인공적인 향을 첨가하지 않은 무향으로 침샘 자극 완화
- 고온 입자로 물에 잘 흡수되어 가루 날림 없이 부드러운 믹싱
- 러버 인상재와 같은 깨끗한 표면과 정확한 인상 결과물

| 포장 및 구성

- 용량 : 1kg (Pink)
- SSS New Algistar + Normal 1박스
- 1kg×10개, 계량컵 2개, 스푼 2개

| 특이 사항

- 유효 기간 : 3년

Technical Data

Normal Type

믹싱 타임		20~30초
총 작업 시간		2분
구강 내 경화 시간		1분 30초~2분
총 세팅시간		3분 30초
변형 회복률		97.7%
압축 변형률		14.0%
압축 강도		0.80MPa

ALGINATE MIXER MX-250 / MX-300 | 알지네이트 믹서기 엠엑스 250 / 엠엑스 300

자동 믹서기 | 263439



재선기

| 제조원 MOTION(모션) | 판매원 신성치과기재

| 용도 알지네이트 믹서기

| 특징

- Dual-Stage Start Function으로 기어의 수명 연장 (MOTION 특허 기술)
- Vibration Absorption으로 모터의 스트레스 및 소음 최소화 가능
- 높은 rpm으로 믹싱 타임 단축(국내 출시 제품 중 최고 rpm)

| 포장

믹서기, 계량물병, 믹싱볼 4개, 스파츨러, 스틱, 마그네틱 바스켓, 전원선

| 사이즈 20.5×24.5×29.5(cm)

Technical Data

	MX-250	MX-300
사이즈	20.5×24.5×29.5(cm)	20.5×24.5×29.5(cm)
무게	18kg	18kg
패널	버튼식	정전식 터치
타이머	1~16초	1~20초
메모리	3가지 타입	사용자 지정
최대출력	2,900 ~ 3,600rpm (국내 출시 제품 중 최고 rpm)	2,900 ~ 3,600rpm (국내 출시 제품 중 최고 rpm)




MX-250



MX-300

Dual-stage Start Function

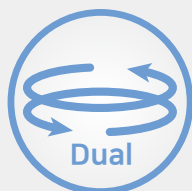

Dual Stage Start Function이란?


모터가 두 단계에 걸쳐 회전하는 기능
살짝 한번 돌고 멈췄다가 다시 회전을 함으로써
기어에 부담이 되지 않아 기어의 수명이 연장되는
모션만의 특허기술



NEW ALGISTAR⁺사용 시
권장 믹싱 타임 안내



1스푼
믹싱 타임 : 8초

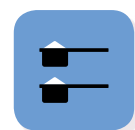


2스푼
믹싱 타임 : 8초



3스푼
믹싱 타임 : 10초

CAVEX ORTHOTRACE | 오쏘트레이스

알지네이트 인상재 | 03054

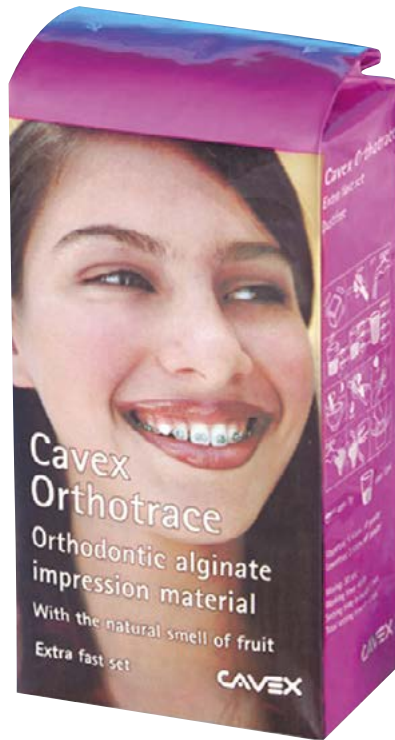

| 제조원 CAVEX(카벡스) | 판매원 신원덴탈

| 용도 인상 채득

| 특징

- 교정용 알지네이트 : 찢김 저항성이 좋음 (1.18N/mm)

| 포장 500g

| 특이 사항

- 유효 기간 : 3년

CAVEX IMPRESSIONAL | 임프레셔널

알지네이트 인상재 | 03013



| 제조원 CAVEX(카벡스) | 판매원 신원덴탈

| 용도 인상 채득

| 특징

- 향기가 좋고 분진이 없으며 일반 알지네이트보다 알긴산이 7% 더 들어있어 표면이 매끄러운 고탄성 알지네이트
- Agar와 연합 인상에 탁월한 결합력이 있다.

| 포장 500g

| 특이 사항

- 유효 기간 : 3년

PERMLASTIC LIGHT

퍼스라스틱 라이트

러버 인상재 | 103743



| 제조원 KERR(커) | 판매원 신홍

| 용도 인상 채득

| 특징

- Permlastic중에서 가장 흐름성이 높아 인레이나 고정된 브릿지 인상에 사용
- Heavy Body와 완벽하게 결합하여, 정확하고 선명한 인상 채득 가능

| 포장 및 구성

- 용량 : Base 95g, Catalyst 130g

PERMLASTIC REGULAR

퍼스라스틱 레귤러

러버 인상재 | 103744



| 제조원 KERR(커) | 판매원 신홍

| 용도 인상 채득

| 특징

- 세부면을 채득할 수 있는 흐름성
- 크라운 브릿지 인상 시 Permlastic Light Body와 함께 사용
- 거친 언더컷에서 떼어낼 때 찢어지지 않음

| 포장 및 구성

- 용량 : Base 100g, Catalyst 130g

PERMLASTIC HEAVY

퍼스라스틱 헤비

러버 인상재 | 103742



| 제조원 KERR(커) | 판매원 신홍

| 용도 인상 채득

| 특징

- Light Body와 함께 사용하기에 적합
- Heavy Body 농도는 결과적으로 이중 혼합 또는 동대환(Copper Band) 인상에서 Light Body Permlastic에 적절한 압축을 가함

| 포장 및 구성

- 용량 : Base 100g 2개, Catalyst 70g

PERMLASTIC ADHESIVE

퍼스라스틱 어드히시브

퍼스라스틱 어드히시브 | 103741



| 제조원 KERR(커) | 판매원 신홍

| 용도 퍼스라스틱 인상재에 사용하는 트레이 어드히시브

| 특징

- 컴파운드, 아크릴릭, 메탈, 플라스틱 트레이 등에 얇은 층으로 도포하는 어드히시브

| 포장 및 구성

- 용량 : 59ml / 병

FREE-FLO SYRINGE | 프라-플로 시린지

인상재용 주사기 | 103085~6



| 제조원 KERR(커) | 판매원 신홍

| 용도 러버용 시린지

| 특징

- 인상재 주입이 용이하고 자비소독(Boiling)과 차가운 멸균액 소독이 모두 가능

| 포장 및 구성

- 용량 : 시린지, 팁, Petrolatum, Cleaning Brush, O-Ring

COE RUBBER BASE SYRINGE | 코 러버 베이스 시린지

인상재용 주사기 | 102876



| 제조원 GC AMERICA(지씨 어메리카) | 판매원 신홍

| 용도 레진 및 컴포지트 주입

| 특징

- 많은 양을 정확하게 주입 가능함

| 포장 및 구성

- 용량 : Coe Syringe 1개,
Coe Syringe Tip 12개,
Brush 1개

COE SYRINGE TIP | 코 시린지 팁

인상재용 주사기 팁 | 102878



| 제조원 GC AMERICA(지씨 어메리카) | 판매원 신홍

| 용도 코 시린지용 팁

| 특징

- 코 시린지 전용 팁

| 포장 및 구성

- 용량 : A Type Tip (저점도용) 25개 / 팩

IMPRESSION COMPOUND CAKE | 임프레션 컴파운드 케이크

임프레션 컴파운드 | 106141, 106143



| 제조원 KERR(커) | 판매원 신홍

| 용도 천연 수지 인상재

| 특징

- 변연 근압 형성의 인상에 적합
- 연화하기 쉽고 조작이 간편함
- 경화 후 경도가 높아 쉽게 변형되지 않음

| 포장 및 구성

- 용량 : 227g(8개) / 팩
- Green Cake 작업 온도 : 50~51°C
- Red Cake 작업 온도 : 55~56°C

IMPRESSION COMPOUND STICK | 임프레션 컴파운드 스틱

임프레션 컴파운드 | 106144, 106142, 137016



| 제조원 KERR(커) | 판매원 신홍

| 용도 천연 수지 인상재

| 특징

- 변연 근압 형성의 인상에 적합
- 연화하기 쉽고 조작이 간편함
- 경화 후 경도가 높아 쉽게 변형되지 않음

| 포장 및 구성

- 용량 : 113g(15개) / 팩
- Green Stick 작업 온도 : 50~51°C
- Red Stick 작업 온도 : 55~56°C
- Gray Stick 작업 온도 : 53~54°C

TRACING STICKS GREEN | 트레이싱 스틱스 그린

임프레션 컴파운드 | 274275



| 제조원 KEMDENT(캠덴트) | 판매원 신홍

| 용도 천연 수지 인상재

| 특징

- 인상 트레이의 테두리 확장에 주로 사용되는 재료
- 점도가 높기 때문에 흠의 전체 깊이를 기록하는 용도로 사용

| 포장 및 구성

- 용량 : 15개 / 팩
- 색상 : Green
- 작업 온도 : 약 40°C

SSS STONE | 산에스 스톤

치과용 석고 | 233006



| 제조원 SSS(산에스) | 판매원 신성치과기재

| 특징

NEW GYPSTONE

- 낮은 팽창 계수로 정교한 모델 제작 가능
- DF Rock S(초경석고) : Oil-Free, Dust-Free

Technical Data

	New Gypstone	DF Rock S
물 / 석고 비율(W/P)	0.24	0.20
경화 시간	10분	10분
팽창률	0.20%	0.08%
압축 강도	49MPa	63MPa

| 포장 및 구성

- 포장 : 18kg : 스톤(1.5kg) 12개 / 1박스
- 색상 : Ivory Yellow / 233006
White / 233569
Brown (DF Rock S) / 233007

JSD STONE | 자생단 스톤

치과용 석고 | 276670~6



| 제조원 JSD(자생단) | 판매원 신흥, 디브이홀딩스

| 특징

- 팽창률 20% 미만, 경화 시간 10분 내외
- 원산지 : 중국

| 포장 및 구성

- 단위 : 1kg×10개 / 박스 (플라스터 : 10kg / 박스)

| 종류 및 사양

종류	물/석고 비율	압축 강도 (MPa)	10kg	1kg
플라스터 (White)	0.48	15	276670	
초경석고 (Peach Red)	0.23	55	276671	276674
경석고 (Yellow)	0.24	50	276672	276675
교정용 석고 (White)	0.3	30	276673	276676

HI-KOSETON (GENERAL HARD)

하이 코세톤

치과용 석고(경석고) | 103538~9



| 제조원 MARUISHI(마루이시) | 판매원 신홍

| 용도 일반적인 모델 제작에 사용(General Hard Stone)

| 특징

- 분말이 미세하여 각종 인상재에 대해 치밀하고 활택한 모형을 얻을 수 있음

| 포장 및 구성

- 종류 : 103538 Hi-Koseton 1kg
- 103539 Hi-Koseton 10kg (1kg×10개 / 박스)
- 색상 : Yellow

| 특이 사항 - 유효 기간 : 3년

CRYSTAL ROCK (EXTRA HARD)

크리스탈 락

치과용 석고(초경석고) | 103542~3



| 제조원 MARUISHI(마루이시) | 판매원 신홍

| 용도 정밀 모형 제작에 사용(Extra Hard Stone)

| 특징 초강도의 팽창이 억제된 경석고

| 포장 및 구성

- 종류
- 103542 Crystal Rock 3kg (1kg×3개)
- 103543 Crystal Rock 18kg (1kg×18개)
- 색상 : Pink

| 특이 사항

- 유효 기간 : 3년

STICKY WAX

스티키 왁스

치과용 왁스 | 106150



| 제조원 KERR(커) | 판매원 신홍

| 용도 치과 보철물 제작에 사용되는 치과용 왁스

| 특징

- 강도가 높으며 다목적으로 사용 가능
- 완전히 소각할 수 있으며 납착할 때도 완전히 용해
- 주의 사항 : 73°C의 온도의 따뜻한 물로 반죽할 것

| 포장 및 구성

- 용량 : 37.1g(15개) / 팩

COE TRAY PLASTIC

코 트레이 플라스틱

개인 트레이 레진 | 103524



| 제조원 GC AMERICA(지씨 어메리카) | 판매원 신홍

| 용도 개인 트레이 제작용 레진

| 특징

- 자가 중합형 레진
- 표면이 매끄럽고, 개인 트레이를 정확하게 제작 가능

| 포장 및 구성

- 용량 : Powder 454g, Liquid 177ml, Sep 59ml, Acc

PLAQUE PHOTO

플라크 포토

개인 트레이 레진 | 237230



| 제조원 WILLMANN&PEIN(윌만&페인) | 판매원 신홍

| 용도 개인 트레이 제작용 레진

| 특징

- 단단하고 끈적임이 없는 광중합형 트레이 레진
- Plaque Photo는 기성형된 시트에 사용하는 One-Component
- 광중합형 개인 트레이 레진으로 세퍼레이터와 함께 사용하면 손가락, 모델 등에 들러붙거나 변형되지 않음
- Powder와 Liquid를 혼합할 필요가 없어 작업 시간을 줄여주고 냄새가 나지 않음

| 포장 및 구성

- 포장 : 50개 / 팩
- 색상 : Pink, Blue, Nature

FASTRAY

패스트레이

개인 트레이 레진 | 146147



| 제조원 KEYSTONE INDUSTRIES(키스톤 인더스트리)

| 판매원 신홍

| 용도 개인 트레이 제작용 레진

| 특징

- 자가 중합형이고 정확하며 끈적임이 없음
- 25°C를 기준으로 실내 온도에 따른 경화 속도 변화

| 색상 Blue

| 포장 및 구성

- Keystone Fastray P&L Blue Kits
- Powder(454g), Liquid(8oz)

IMPRESSION TRAY, BITE

바이트 임프레션 트레이

인상용 메탈 트레이 | 102872



| 제조원 GC AMERICA(지씨 어메리카) | 판매원 신홍

| 용도 교합 체크용

| 특징

- 한 쌍의 분리할 수 있는 교합 모델을 만들 수 있음

| 포장 및 구성

- 사이즈
- #72 Unilateral Non-Water Cooled
- 3/4" Buccal Width
- 4" Length
- 15 / 16" Anterior Depth

CHECK BITE TRAY

체크 바이트 트레이

일회용 인상 트레이 | 102873~4



| 제조원 GC AMERICA(지씨 어메리카) | 판매원 신홍

| 용도 교합 체크용

| 특징 일회용으로 간편함

| 포장 및 구성

- Posterior 73D
 - 50개 / 박스
 - Length : 2-3/16"
 - Buccal Width : 2-3/8"
 - Anterior Depth : 3/4"
- Anterior 75D
 - 40개 / 박스
 - Length : 1-1/2"
 - Buccal Width : 2-5/8"
 - Anterior Depth : 3/4"

FRAME CUT BACK TRAY

프레임 컷 백 트레이

일회용 인상트레이 | 226759



| 제조원 J.MORITA(모리타) | 판매원 신홍

| 용도 인상용 트레이

| 특징

- 하악 총의치를 흡착 성공률을 높이는 신개발 스냅의 인상용 트레이
- 강화형 플라스틱 재질

| 포장 및 구성

Frame Cut Back Tray Kit

- M사이즈 3개, L사이즈 3개

Frame Cut Back Tray Refill

- M사이즈 6개, L사이즈 6개

IMPRESSION TRAY ORIENTAL

임프레션 트레이 오리엔탈

인상용 메탈 트레이 | 102858~66



| 제조원 GC AMERICA(지씨 어메리카) | 판매원 신홍

| 용도 유치악 인상 채득용

| 특징

- 다양한 인상재에 잘 맞는 트레이로, 동양인의 구조에 맞게 설계됨

| 포장 및 구성

Impression Tray 8-Oriental

- 상악용 : U11, U12, U13, U14
- 하악용 : L11, L12, L13, L14 각 1개 / 박스

Impression Tray 8-Oriental Refill

- U11~14, L11~14

※ 번호가 클수록 작은 크기

IMPRESSION TRAY SOLID

임프레션 트레이 솔리드

인상용 메탈 트레이 | 102868



| 제조원 GC AMERICA(지씨 어메리카) | 판매원 신홍

| 용도 인상 채득용

| 특징

- 고급 스테인리스 스틸로 튼튼하며, 단순한 매끄러운 디자인

| 포장 및 구성

Impression Tray Solid

- 상악용 : U101, U104, U107, U109

- 하악용 : L120, L121, L122, L124 각 1개 / 박스

Impression Tray Solid Refill

- U101~109, L121~124

※ 번호가 클수록 작은 크기

IMPRESSION TRAY DENTURE

임프레션 트레이 덴처

인상용 메탈 트레이 | 102848~56



| 제조원 GC AMERICA(지씨 어메리카) | 판매원 신홍

| 용도 무치악 인상 채득용

| 특징

- 무치악 트레이로, 사각형, 삼각형, 달갈형의 3개의 형태로 분류
- Complete Denture Perforated (니켈 도금)

| 포장 및 구성

Impression Tray 8-Denture

- 상악용 : U61, U62, U63, U64

- 하악용 : L66, L67, L68, L69

Impression Tray 8-Denture Refill

- U61~64, L66~69

※ 번호가 클수록 작은 크기

IMPRESSION TRAY MCGOWAN | 임프레션 트레이 맥관

인상용 메탈 트레이 | 102857



| 제조원 GC AMERICA(지씨 어메리카) | 판매원 신흥

| 용도 무치악 인상 채득용

| 특징

- 무치악 인상용 트레이로, 전치부에 치아가 일부 잔존해 있고, 구치부가 결손된 경우에 사용하기 용이함
- McGowan Immediate Denture Tray Perforated (니켈 도금)

| 포장 및 구성

Impression Tray 8-Mcgowan

- 상악용 : U41, U42, U43, U44
- 하악용 : L45, L46, L47, L48

Impression Tray 8-Mcgowan Refill

- U40~44, L45~48

※ 번호가 클수록 작은 크기